



## GUIDE RAPIDE – FRANÇAIS




eFOLDi

### Déplier le fauteuil motorisé eFOLDi

Avant de commencer, placez le fauteuil motorisé dans un espace ouvert, loin des animaux domestiques et des jeunes enfants.

Le dépliage est simple et avec un peu de pratique, vous pourrez le configurer en quelques secondes.

Nous vous conseillons de vous entraîner avec le Power Chair avant de vous aventurer pour la première fois.

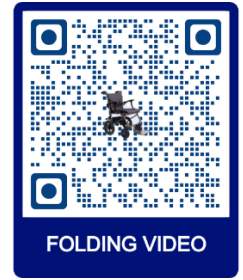

**1** Des roues anti-bascule et un chargeur de batterie sont fournis avec votre fauteuil motorisé.

**2** Installez les roues anti-bascule si vous le souhaitez. Il suffit d'appuyer dessus et de les verrouiller en place.

**3** Dépliez le fauteuil motorisé en poussant simplement le bas du siège vers le bas.



**4** Gardez le câble du contrôleur à l'écart des points de pincement tels que les supports d'accoudoir.

**5** Installez les supports d'accoudoir dans les fentes et appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

**6** Prenez l'unité de contrôle et...



**7** ...insérez la tige du contrôleur dans le raccord de l'accoudoir sous l'accoudoir.

**8** ...ajuster la position du contrôleur et serrer avec le bouton moleté.

**9** Retirez la commande de l'accompagnateur de la poche arrière et fixez-la à la barre à l'arrière.



**10** Tirez le repose-pieds vers le bas.

**11** Installez les coussins de siège comme illustré. Ceux-ci sont maintenus en place par des pattes velcro.

**12** ...assurez-vous qu'ils sont repliés sur le dossier et sous le siège. Le fauteuil motorisé est maintenant prêt.

## Plier le fauteuil motorisé eFOLDi



**1** Desserrez légèrement le bouton moleté et retirez le contrôleur.



**2** Placez le contrôleur et la sangle de la ceinture de sécurité sur le siège.



**3** Retirez la commande du préposé et placez-la dans la poche à l'arrière du fauteuil.



**4** Assurez-vous que les deux accoudoirs sont réglés dans leur position la plus haute.



**5** - en appuyant sur le petit bouton argenté pour régler les accoudoirs.



**6** Vérifiez que les roues avant sont positionnées vers l'avant pour assurer un pliage en douceur.  
**Pointe** tirez la chaise vers l'arrière pour aligner les roues



**7** Passez ensuite sous le bord du siège et tirez la barre de déverrouillage vers le haut pour libérer le siège et...



**8** - tirez le siège vers le haut pour plier le fauteuil motorisé.



**9** Repliez le repose-pieds.

## Fonctionnement du fauteuil motorisé eFOLDi



Les piles peuvent être retirées en appuyant sur la languette rouge vers le haut et en tirant vers l'arrière.



Vous allumez l'alimentation principale ici qui alimente le contrôleur du combiné.

**Éteignez toujours cette fonction lorsque le fauteuil n'est pas utilisé pour économiser la batterie.**



Allumez le contrôleur du combiné.

Le contrôleur du combiné a des boutons pour régler la vitesse et des affichages pour indiquer la puissance restante et le réglage de la vitesse.

Veuillez noter que cette brochure est uniquement destinée à servir de guide rapide. Consultez notre manuel du produit pour des instructions complètes. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.