



## KURZANLEITUNG – DEUTSCH

### Aufklappen des eFOLDi Lite Scooters


Stellen Sie den Scooter vor dem Start aufrecht hin in einem offenen Raum fern von Haustieren und kleinen Kindern.

Das Aufklappen des Scooters ist unkompliziert und mit ein wenig Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle aufbauen.

Wir raten Ihnen, mit dem Scooter zu üben, bevor Sie sich zum ersten Mal auf den Weg machen.



**1** Lenksäulenverriegelung lösen...

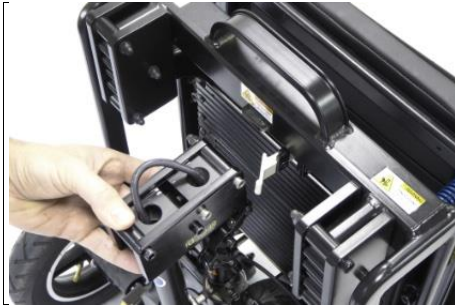

**2** ... und lassen Sie die Säule freischwingen.



**3** Ziehen Sie den Lenker heraus und nach oben...



**4** ...bis sie in einer vertikalen Linie einrasten.



**5** Lokalisieren Sie den kleinen schwarzen Stopper an der Seite und ziehen Sie daran, um die Vorderradbaugruppe zu lösen.



**6** Halten Sie die Lenksäule und die Sitzlehne fest und ziehen Sie sie auseinander ...



**7** ... der Scooter entfaltet sich, wenn Sie die Sitzlehne und die Lenksäule auseinanderziehen...



**8** auseinander ziehen und...



**9** ... verriegelt sich der Scooter in seiner geöffneten Position.



**10** Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsklinken an der Stahlstange eingerastet sind...


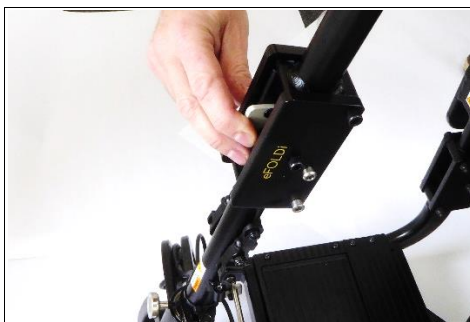









**11** ...wenn nicht, drücken Sie Ihren Fuß auf die Fußplatte, um den Scooter zu öffnen.



**12** Vergewissern Sie sich, dass sich die Magnetbremse in der **VERRIEGELTEN** Position befindet, um den Motor einzukuppeln.

## Falten der eFOLDi Lite Scooters

		
<b>1</b> Klappen Sie die Sitzlehne auf die Sitzfläche herunter.	<b>2</b> Drücken und halten Sie die kleine Verriegelung an der Lenksäule.	<b>3</b> ...und klappen Sie die Säule nach unten, bis...
		
<b>4</b> ...es wird durch den Magnetverschluss verriegelt.	<b>5</b> Halten Sie den Scooter fest an seiner Lenksäule und dem Tragegriff und drücken Sie die Säule fest nach unten in Richtung der Fußplatte	<b>6</b> Kippen Sie den Roller schräg nach hinten und verwenden Sie Ihren Fuß hinter dem Lenkrad, um zu verhindern, dass er sich von Ihnen wegbewegt
		
<b>7</b> ...auf die Lenksäule nach innen drücken, bis das Vorderrad einrastet...	<b>8</b> ...und Lenksäulenverriegelung rastet ein.	<b>9</b> Drücken Sie die Lenksäule hinein, um sie fest am Rahmen zu verriegeln.

## eFOLDi Lite Betrieb

		
Die Batterie kann entfernt werden, indem die Verriegelung angehoben und nach oben gehoben wird.  An der Seite des Akkus befindet sich eine Ladestation.	Um den Scooter einzuschalten, drücken Sie die graue Taste unter der Batterieanzeige.  Wählen Sie (D) Fahren oder (R) Rückwärts und drücken Sie den Daumengashebel, um loszulegen.  <b>Laden Sie den Akku immer so schnell wie möglich auf wie möglich, wenn die Anzeige ist Bernstein anzeigt.</b>	Um den Roller in ein rollendes Gepäck zu verwandeln, stellen Sie sicher, dass die vertikale Lenksäule gegen die Lenksäulenverriegelung eingerastet ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre nur als Kurzanleitung gedacht ist. Vollständige Anweisungen finden Sie in unserem Produkthandbuch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.