




Før bruk må eFOLDi Lite plasseres i et åpent område, borte fra kjæledyr og små barn. Det er enkelt å brette den ut, og med litt øvelse kan du sette den opp på få sekunder. Vi anbefaler at du øver deg før første utflukt.

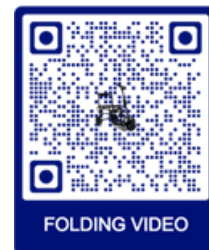

**SLIK
FALLER
DU UT**

TRINN 1 - FRIGJØR RATTSTAMMEN

Fjern all emballasje før du begynner.



Trykk på den gule låsen for å frigjøre rattstammen, slik at den kan svinges ut.

Løft styret utover og oppover til det klikker sikkert i loddrett stilling.

TRINN 2 - LÅS OPP OG BRETT UT



Hold i rattstammen og finn den lille gule vippeknappen på siden av Lite, og trekk i den for å låse opp forhjulsenheten.

Hold i rattstammen og seteryggen, og trekk dem fra hverandre. Scooteren vil folde seg ut, og du vil høre et klikk når den låses i åpen posisjon.

TRINN 3 - SISTE SIKKERHETSKONTROLL



Sørg for at låsemekanismene er godt festet til stålstangen ved å trykke foten ned på fotplaten.



Kontroller at den røde magnetiske bremsespaken står i LÅST posisjon for å koble inn motoren.

KOMME I GANG



For å slå på sparkesykkelen trykker du på den grå knappen under batteriskjermen. Velg (D) for Drive (kjør) eller (R) for Reverse (revers), og trykk deretter på tommelgassen for å sette i gang.

Sørg for å lade batteriet når displayet viser gult.

HVORDAN BRUKER DU



For å gjøre scooteren om til rullende bagasje trekker du styret opp og trykker på den gule spaken, slik at den festes på det andre stoppunktet.



For å lade kobler du strømforsyningskabelen til ladeporten øverst på rattstammen.



Ta ut batteriet ved å løfte låsen og trekke det forsiktig oppover.

Ladeporten er plassert på siden av batteriet.

HVORDAN BRYTE

TRINN 1 - BRETT RYGGSTØTTEN OG RATTSTAMMEN



Brett seteryggen flatt ned mot setebunnen.



Trykk og hold den lille gule låsen på forsiden av rattstammen, og brett den deretter ned til styret klikker på plass, sikret av magneten.



Med armlener montert, trekker du i den svarte vippebryteren for å frigjøre setet og folde det sammen.

TRINN 2 - SLÅ SAMMEN OG LÅS SCOOTEREN



Ta tak i scooteren ved rattstammen og bærehåndtaket, og løft seterammen til oppreist stilling.



Vipp sparkesykkelen skrått bakover (du kan bruke foten bak hjulet for å støtte den om nødvendig), og balansere den på hjulene.



Trykk rattstammen innover til forhjulet og låsen klikker sikkert på plass. Trykk deretter rattstammen godt inn for å låse den tett mot rammen.



Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en kortfattet veiledning. Du finner fullstendige instruksjoner i produkthåndboken. Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss på +44 800 915 0800 eller sende en e-post til services@efoldi.com