



HURTIGGUIDE – NORSK



eFOLDi

Utfolding av eFOLDi Lite Scooter

Før du starter, stå scooteren oppreist på et åpent sted unna kjæledyr og små barn.


Å folde ut sparkesykkelen er grei og med litt øvelse vil du kunne sette den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med scooteren før du begir deg ut for første gang.



1

Slipp rattstammelåsen...

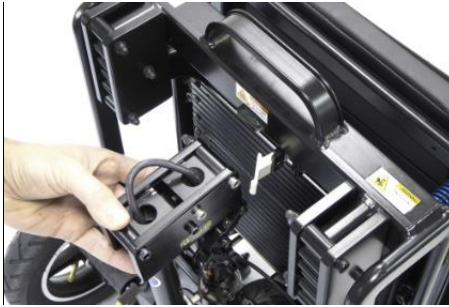

2

...og la søylen svinge fritt.



3

Trekk styret ut og oppover...



4

...til de låser seg i en vertikal linje.



5

Finn en liten svart stopper på siden og trekk for å frigjøre forhjulsenheten.



6

Hold rattstammen og seteryggen og trekk dem fra hverandre...



7

...scooteren vil utfolde seg når du trekker seteryggen og rattstammen fra hverandre...



8

trekke fra hverandre og...



9

... scooteren låser seg selv i åpen posisjon.



10

Sørg for at låselåsene er låst til stålstangen...



11

... hvis ikke trykker du foten ned på fotplaten for å låse scooteren åpen.



12

Kontroller at magnetbremsen er i **LÅST** posisjon for å koble inn motoren.

Sammenlegging av eFOLDi Lite Scooter

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 1 Fell seteryggen ned til setebunnen. | 2 Trykk og hold den lille låsen på rattstammen... | 3 ...og brett kolonnen ned til .. |
|  |  |  |
| 4 ...den låses av magnetlåsen. | 5 Hold scooteren godt i rattstammen og bærehåndtaket, og press kolonnen ned mot fotplaten | 6 Vipp scooteren tilbake i en vinkel og bruk foten bak rattet for å hindre at den beveger seg bort fra deg |
|  |  |  |
| 7 ...trykk innover på rattstammen til forhjulet låses på plass... | 8 ...og rattstammelåsen låses i posisjon. | 9 Trykk inn rattstammen for å låse den tett mot rammen. |

eFOLDi Lite - operasjon

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Batteriet kan fjernes ved å løfte låsen og løfte oppover. Det er et ladepunkt på siden av batteriet. | For å slå på scooteren, trykk på den grå knappen under batteridisplayet. Velg (D) Kjør eller (R) Revers og trykk på tommelgasspaken for å gå. Lad alltid batteriet så snart som mulig som mulig når skjermen er | For å gjøre scooteren til rullende bagasje, sørg for at den vertikale rattstammen er låst mot rattstammelåsen. |

Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en hurtigveiledning. Se vår produkthåndbok for fullstendige instruksjoner. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler.