



SZYBKA PORADA Rozkładanie hulajnogi eFOLDi Lite



eFOLDi

Przed uruchomieniem ustaw hulajnogę pionowo na otwartej przestrzeni z dala od zwierząt domowych i małych dzieci.

Rozkładanie hulajnogi jest proste i przy odrobinie wprawy będziesz w stanie rozłożyć ją w kilka sekund.

Radzimy poćwiczyć jazdę na hulajnodze przed pierwszą wyprawą.




FOLDING VIDEO



1

Zwolnij zatrzask kolumny kierownicy...

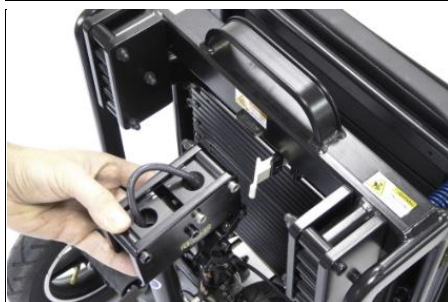

2

...i pozwól kolumnie swobodnie się kotysać.



3

Wyciągnij kierownicę na zewnątrz i do góry...



4

...dopóki nie ustawią się w pionowej linii.



5

Znajdź maty czarne ogranicznik z boku i pociągnij, aby zwolnić zespół przedniego koła.



6

Przytrzymaj kolumnę kierownicy i oparcie siedzenia i rozsuń je...



7

... hulajnoga rozłoży się, gdy rozłożysz oparcie siedzenia i kolumnę kierownicy i...



8

...skuter zablokuje się w pozycji otwartej.



9

Upewnij się, że zatrzaski blokujące zatrasnęły się na stalowym pręcie...



10

...jeśli nie, naciśnij stopę na podnóżek, aby zablokować hulajnogę w pozycji otwartej.



11








Jeśli nie zostały jeszcze zainstalowane, zamontuj poduszki siedzenia i oparcie siedzenia, jak pokazano.



12

Sprawdź, czy hamulec magnetyczny jest w położeniu **ZABLOKOWANYM**, aby włączyć silnik.

Składanie hulajnoggi eFOLDi Lite

		
<p>1 Złóż oparcie siedzenia do podstawy siedzenia.</p>	<p>2 Naciśnij i przytrzymaj maty zatrask na kolumnie kierownicy.</p>	<p>3 złóż kolumnę w dół, aż..</p>
		
<p>4 ..zamykana na zatrask magnetyczny.</p>	<p>5 Mocno chwyć hulajnogę za kolumnę kierownicy i uchwyt do przenoszenia i mocno dociśnij kolumnę w kierunku podnóżka</p>	<p>6 Przechyl hulajnogę do tyłu pod kątem i użyj stopy za kierownicą, aby zatrzymać odsuwanie się od Ciebie</p>
		
<p>7 ..naciśnij kolumnę kierownicy do wewnątrz, aż przednie koło zablokuje się na swoim miejscu..</p>	<p>8 ..i zatrask kolumny kierownicy blokuje się na swoim miejscu.</p>	<p>9 Dociśnij kolumnę kierownicy, aby mocno zamocować ją na ramie.</p>

Obsługa eFOLDi Lite

		
<p>Akumulator można wyjąć, podnosząc zatrask i podnosząc go do góry. Z boku akumulatora znajduje się punkt ładowania.</p>	<p>Aby włączyć hulajnogę, naciśnij szary przycisk pod wyświetlaczem baterii. Wybierz (D) Drive lub (R) Reverse i naciśnij kciuk, aby ruszyć. Zawsze ładuj baterię tak szybko, jak to możliwe jak to możliwe, gdy wyświetlacz jest wskazuje na bursztyn.</p>	<p>To turn the scooter into rolling luggage ensure the vertical steering column is locked against the steering column latch. Aby zmienić hulajnogę w bagaż na kółkach, upewnij się, że pionowa kolumna kierownicy jest zablokowana na zatrasku kolumny kierownicy.</p>