



SZYBKA PORADA


eFOLDi 

Rozkładanie krzesła elektrycznego eFOLDi

Przed rozpoczęciem należy umieścić Power Chair na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci.

Rozkładanie jest proste i przy odrobinie praktyki będziesz w stanie rozłożyć go w kilka sekund.

Radzimy poćwiczyć z Power Chair przed pierwszą wyprawą.

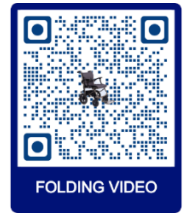

1 Kółka zapobiegające przewróceniu i ładowarka akumulatora są dostarczane z wózkiem elektrycznym.

2 W razie potrzeby zamontuj koła zapobiegające przewróceniu. Te po prostu wciskają się i blokują na swoim miejscu.

3 Rozłóż krzesło elektryczne, po prostu naciskając podstawę siedziska w dół.



4 Przewód kontrolera należy trzymać z dala od punktów ściśnięcia, takich jak wsporniki podtokietników.

5 Zainstaluj wsporniki podtokietników w szczelinach i dociśnij je, aż się zablokują.

6 Weź jednostkę sterującą i...



7 ...włóż drążek kontrolera w mocowanie podtokietnika pod podtokietnikiem.

8 ...wyreguluj położenie regulatora i dokręć radełkowanym pokrętkiem.

9 Wyjmij kontrolkę operatora z tylnej kieszeni i przymocuj do drążka z tyłu.



10 Pociągnij podnóżek w dół.

11 Zamontuj poduszki siedzenia, jak pokazano. Są one utrzymywane na miejscu za pomocą rzepów.

12 ...upewnij się, że są one złożone nad oparciem i pod siedzeniem. Krzesło Power jest już gotowe.

Składanie krzesła elektrycznego eFOLDi

		
<p>1 Lekko poluzuj radetkowane pokrętko i wyjmij kontroler.</p>	<p>2 Umieść kontroler i pas bezpieczeństwa na siedzeniu.</p>	<p>3 Usuń element sterujący dla opiekuna i umieść go w kieszeni z tyłu krzesła.</p>
		
<p>4 Upewnij się, że oba podtokietniki są ustawione w najwyższej pozycji.</p>	<p>5 - naciskając maty srebrny przycisk, aby wyregulować podtokietniki.</p>	<p>6 Sprawdź, czy przednie koła są ustawione z przodu, aby zapewnić płynne składanie. Porada Pociągnij krzesło do tyłu, aby wyrównać koła</p>
		
<p>7 Następnie sięgnij pod krawędź siedziska i pociągnij drążek zwalnający do góry, aby zwolnić siedzisko i...</p>	<p>8 - pociągnij siedzisko do góry, aby złożyć krzesetko elektryczne.</p>	<p>9 Złóż podnóżek.</p>

Działanie krzesła elektrycznego eFOLDi

		
<p>Baterie można wyjąć, naciskając czerwoną wypustkę w górę i pociągając do tyłu.</p>	<p>W tym miejscu włącza się główne zasilanie, które zasila kontroler pilota.</p> <p>Zawsze wyłączaj to, gdy fotel nie jest używany, aby oszczędzać energię akumulatora.</p>	<p>Włącz kontroler słuchawki.</p> <p>Pilot zdalnego sterowania ma przyciski do regulacji prędkości i wyświetlacze wskazujące pozostałą moc i ustawienie prędkości</p>

Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma być jedynie skróconym przewodnikiem. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi produktu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer 0800 915 0800 lub e-mail hello@efoldi.com