



HITRI VODNIK - Slovenščina




eFOLDi

Odpiranje skuterja eFOLDi Lite

Preden začnete, postavite skuter pokončno na odprtem prostoru, stran od hišnih ljubljencev in majhnih otrok.

Odpiranje skuterja je preprosto in z malo vaje ga boste lahko nastavili v nekaj sekundah.

Svetujemo vam, da vadite s skirojem, preden se prvič podate ven.

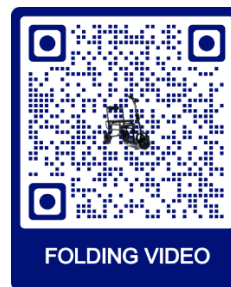

FOLDING VIDEO



1

Sprostite zapah volanskega droga ...



2

...in pustite, da se stebler prosto niha.



3

Potegnite krmilo ven in navzgor ...



4

... dokler se ne zaklenejo v navpično črto.



5

Na strani poiščite majhen črn zamašek in ga povlecite, da sprostite sklop sprednjega kolesa.

6

Držite volanski drog in sedež ter ju razmaknite ...



7

...skuter se bo razgrnil, ko boste razmaknili naslon sedeža in volanski drog ...



8

razstavi in ...



9

...skuter se bo zaklenil v odprt položaj.



10

Prepričajte se, da so zapahi zaklenjeni na jekleni drog ...



11

... če ne, pritisnite nogo navzdol na ploščo za nogo, da zaklenete skuter odprt.



12

Za vklop motorja preverite, ali je magnetna zavora v položaju **ZAKLJUČENO**.

Zlaganje skuterja eFOLDi Lite

		
1 Naslonjalo sedeža zložite do podnožja sedeža.	2 Pritisnite in držite majhen zapah na volanskem drogu ...	3 ...in zložite stolpec navzdol, dokler ...
		
4 ... je zaklenjen z magnetnim zaskokom.	5 Skuter trdno držite za volanski drog in nosilni ročaj ter močno pritisnite steber navzdol proti podnožju.	6 Skuter nagnite nazaj pod kotom in uporabite nogo za volanom, da preprečite odmik od vas.
		
7 ...pritisnite navznoter na volanski drog, dokler se sprednje kolo ne zaskoči ...	8 ... in zapah volanskega droga se zaskoči v položaj.	9 ritisnite volanski drog, da se tesno zaskoči ob okvir.

Operacija eFOLDi Lite

		
Baterijo lahko odstranite tako, da dvignete zapah in ga dvignete navzgor. Na strani baterije je polnilna točka.	Za vklop skuterja pritisnite sivi gumb pod zaslonom baterije. Izberite (D) Vožnja ali (R) Vzratno vožnjo in pritisnite ročico za plin, da greste. Baterijo vedno napolnite takoj kolikor je mogoče, ko je zaslon označuje jantarno.	Če želite skuter spremeniti v kotalno prtljago, zagotovite, da je navpični volanski drog pritrjen na zapah volanskega droga.

Upoštevajte, da je ta brošura namenjena le hitremu vodniku. Za popolna navodila si oglejte naš priročnik za izdelek. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega prodajalca.