

GUÍA RÁPIDA – ESPAÑOL




eFOLDi

Despliegue de la silla eléctrica eFOLDi

Antes de comenzar, coloque la silla eléctrica en un espacio abierto lejos de mascotas y niños pequeños.

El despliegue es sencillo y con un poco de práctica podrá configurarlo en segundos.

Le recomendamos que practique con la Power Chair antes de aventurarse por primera vez.

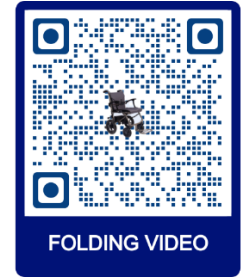

1

Las ruedas antivuelco y el cargador de batería se suministran con su silla eléctrica.



2

Instale las ruedas antivuelco. Estos simplemente presionan y bloquean en su lugar.



3

Despliegue la silla eléctrica simplemente empujando la parte inferior del asiento hacia abajo mientras tira hacia arriba de la palanca de liberación.



4

Instale los soportes del reposabrazos en las ranuras y presiónelos hacia abajo hasta que se bloqueen.
Mantenga los cables alejados de los puntos de pellizco



5

Tome la unidad de control y la varilla y...



6

...inserte la varilla del controlador en el ajuste del reposabrazos debajo del reposabrazos.



7

ajuste la posición del controlador y apriete con la perilla moleteada.



8

... Retire el control del asistente del bolsillo trasero y fíjelo a la barra en la parte trasera.



9

Tire del reposapiés hacia abajo.



10

Instale los cojines de los asientos como se muestra. Estos se mantienen en su lugar mediante pestañas de velcro. Asegúrate de que estén doblados



11

inserte las baterías hasta que encajen en su lugar.
Su silla eléctrica ya está lista.



12

Encienda la silla eléctrica presionando el botón POWER. Consulte su manual para obtener información completa.

Cómo plegar la silla eléctrica eFOLDi

		
<p>1 Desconecte la alimentación con el botón POWER del controlador manual. Siempre desconecte la alimentación cuando la silla no esté en uso para conservar la energía de la batería.</p>	<p>2 Afloje ligeramente la perilla moleteada y retire el controlador. Coloque el controlador y el cinturón de seguridad en la almohadilla del asiento. Vuelva a apretar la perilla para evitar pérdidas.</p>	<p>3 Retire el control del asistente y colóquelo en el bolsillo en la parte trasera de la silla.</p>
		
<p>4 Verifique que las ruedas delanteras estén colocadas adelante para garantizar un plegado suave. Consejo tire de la silla hacia atrás para alinear las ruedas</p>	<p>5 Alcance debajo del borde del asiento y tire de la barra de liberación hacia arriba para liberar el asiento y...</p>	<p>6 ...pull seat upwards and towards you to fold the Power Chair. Fold in footrest.</p>

Carga de la batería de la silla eléctrica eFOLDi

		
<p>Para cargar la silla eléctrica, enchufe el cable del cargador en la base del controlador de joystick y conecte el enchufe de CA a una toma de corriente. Esto cargará AMBAS baterías simultáneamente.</p>	<p>Para retirar las baterías para viajes o carga individual, presione la pestaña roja hacia arriba y deslice la batería hacia atrás.</p>	<p>Las baterías se pueden cargar por separado de la silla usando el adaptador corto de 'coleta' que debe conectarse primero al cable del cargador.</p>

Funcionamiento de la silla eléctrica eFOLDi

		
<p>El controlador del teléfono tiene botones para ajustar la velocidad y pantallas para indicar la energía restante y el ajuste de velocidad. Puede desactivar la sirena de marcha atrás pulsando el botón indicado.</p>	<p>El puerto de carga de su silla eléctrica se encuentra debajo del auricular para cargar AMBAS baterías simultáneamente. También hay una salida USB para alimentar un teléfono u otro dispositivo USB.</p>	<p>The attendant control can be set to adjust walking speed for an attendant/carer and also provides a battery check. The lever controls backwards or forwards motion.</p>

Tenga en cuenta que este folleto pretende ser solo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 0800 915 0800 o envíe un correo electrónico a hello@efoldi.com