



SNABB GUIDE – SVENSKA




eFOLDi

Fäll ut eFOLDi Elstol

Innan du börjar placera elstolen på ett öppet utrymme borta från husdjur och små barn.

Utvecklingen är enkel och med lite övning kommer du att kunna ställa in den på några sekunder.

Vi rekommenderar att du tränar med elstolen innan du ger dig ut för första gången.

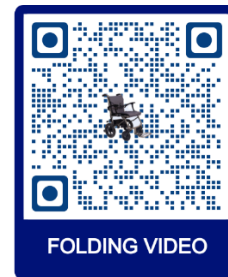

FOLDING VIDEO



1 Tippskydd och batteriladdare medföljer din elstol.

2 Montera tippskyddshjulen om så önskas. Dessa trycks och låses helt enkelt på plats.

3 Fäll ut elrullstolen genom att helt enkelt trycka ned sätesbotten.



4 Håll kontrollkabeln borta från klämpunkter som armstödsstöden.

5 Montera armstöden i spåren och tryck ner dem tills de låses.

6 Ta kontrollenheten och..



7 ..för in styrstången i armstödsbeslaget under armstödet..

8 ..justera regulatorns läge och dra åt med den räfflade vreden.

9 Ta bort assistentkontrollen från bakfickan och fäst den på stängens baktill.












10 Dra ner fotstödet.

11 Montera sittdynor enligt bilden. Dessa hålls på plats av kardborreband..

12 ..se till att dessa fälls över ryggstödet och under sätet. Elstolen är nu klar.

Fällning av eFOLDi Elstol

		
1 Lossa den räfflade vreden något och ta bort kontrollen.	2 Placera kontrollenheten och säkerhetsbältesremmen på sätet.	3 Ta bort åtkomstkontrollen och placera den i fickan på baksidan av stolen.
		
4 Se till att båda armstöden är inställda i sitt högsta läge...	5 _ genom att trycka på den lilla silverknappen för att justera armstöden.	6 Kontrollera att framhjulen är placerade framåt för att säkerställa smidig hopfällning. Dra stolen bakåt med spets för att rikta in hjulen
		
7 Nå sedan under kanten av sätet och dra frigöringsstängningen uppåt för att frigöra sätet och...	8 _dra sätet uppåt för att fälla ihop elstolen.	9 Fäll in fotstödet.

eFOLDi Elstol Drift

		
Batterierna kan tas bort genom att trycka den röda fliken uppåt och dra bakåt.	Du slår på huvudströmmen här som driver handkontrollen. Stäng alltid av detta när stolen inte används för att spara på batteriet.	Slå på handkontrollen. Handenhetens kontroller har knappar för att justera hastighet och displayer för att indikera återstående effekt och hastighetsinställning

Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, se vår användarhandbok. Har du frågor, vänligen ring oss på 0800 915 0800 eller maila services@efoldi.com