

eFOLDi Stručná příručka k aplikaci Explorer



Před použitím umístěte zařízení eFOLDi Explorer na volném prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí. Rozložení je snadné a s nácvikem jej můžete nastavit během několika sekund.

Před prvním výletem doporučujeme nácvik.



JAK SE ROZLOŽIT

KROK 1 - SESTAVENÍ ZAVAZADLA NA KOLEČKÁCH

Před zahájením odstraňte všechny obaly. Nabíječka je umístěna v polystyrenové vložce a klíče jsou v brašně na opěradle sedadla Explorer.



Najděte západky „B“ a „C“. Stiskněte je a vytáhněte rukojeť vleku/nosiče do svislé polohy.

KROK 2 - UVOLNĚNÍ SLOUPKU ŘÍZENÍ



Uvolněte řídítka tahem směrem k sobě.

Zatlačte řídítka dolů a dovnitř a uvolněte západku „E“.

Vytáhněte sloupek řízení nahoru a přes nosné madlo, dokud nezapadne na místo.

Prudkým tahem nebo otočením uvolněte přední kolo.

KROK 3 - ROZLOŽENÍ A UZAMČENÍ



Vytáhněte kolo do přední polohy a opatrně spusťte koloběžku na zem.

Vytáhněte sloupek řízení do svislé polohy a ujistěte se, že klíč sloupku zapadl pod západku „A“.

Vytáhněte sedadlo do svislé polohy a zatlačte stupačky dolů.



Chcete-li skútr zapnout, vložte klíč a otočte jím ve směru hodinových ručiček z polohy 9 na 11 hodin. Otočná plynová páka je na pravé rukojeti. Brzda je ruční a nachází se vedle levé rukojeti. Napětí se zobrazuje na digitálním displeji, nezapomeňte dobít každé 3 měsíce nebo když ukazatel ukazuje 24 V nebo méně.



Chcete-li nabíjet, připojte napájecí kabel k nabíjecímu portu umístěnému na baterii. K dispozici je také port USB pro nabíjení a napájení mobilního telefonu.




Chcete-li baterii vyjmout, odemkněte ji klíčkem a opatrně ji zvedněte nahoru.

*Klíče nalezeny v šedém sedadlovém vaku

JAK SE SKLÁDÁ

KROK 1 - SKLOPENÍ OPĚRADLA A SLOUPKU ŘÍZENÍ

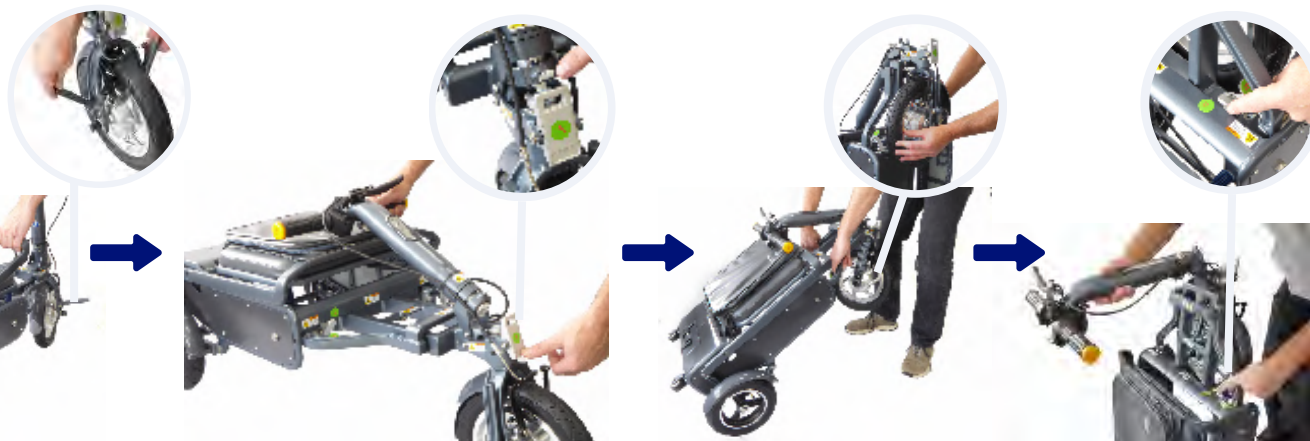

Sklopte sedadlo dolů a nožní kolíky do vzpřímené polohy.

Stiskněte a uvolněte západku „A“ a sklopte sloupek řízení naplocho k sedadlu.

Zvedněte koloběžku do vzpřímené polohy a zajistěte přední kolo naplocho na magnet v rámu.

Najděte západku „D“ a stiskněte ji, přičemž podepřete sloupek řízení.

KROK 2 - SLOŽENÍ A UZAMČENÍ SKÚTRU



Sloupek řízení spusťte nad rukojeť pro přenášení.

Press the steering column into the frame until latch "E" locks.

Zatlačte sloupek řízení do rámu, dokud západka „E“ nezaklapne.

Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a sklopte rukojeť pro přenášení dolů.

Vezměte prosím na vědomí, že tento leták slouží pouze jako stručný návod.

Úplné pokyny naleznete v našem návodu k obsluze výrobku.

V případě jakýchkoli dotazů nám zavolejte na číslo +44 800 915 0800 nebo napište na adresu services@efoldi.com.