




Antes de usarla, coloque la eFOLDi Explorer en una zona abierta, lejos de animales domésticos y niños pequeños. Desplegarlo es fácil y, con la práctica, podrá montarlo en segundos. Recomendamos practicar antes de la primera salida.



## CÓMO DESDOBLAR


### PASO 1 - ARMAR EL EQUIPAJE RODANTE

Retire todo el embalaje antes de empezar. El cargador se encuentra en el forro de poliestireno y las llaves en la bolsa del respaldo del asiento Explorer.

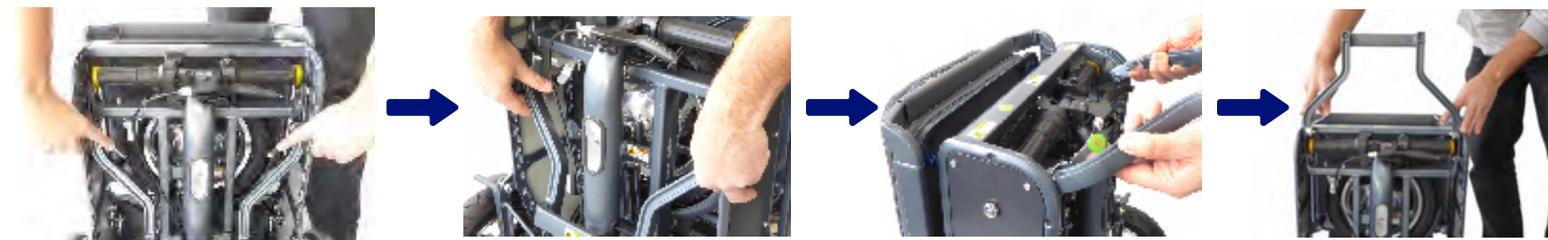

Localice los pestillos «B» y «C». Presiónelos y tire del asa de arrastre/transporte hasta su posición vertical.

### PASO 2 - SUELTE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

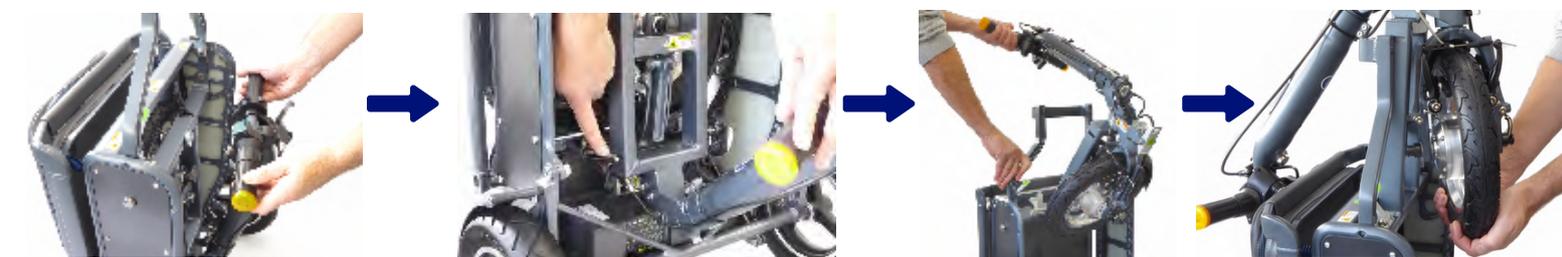

Suelte el manillar tirando hacia usted.

Mientras empuja el manillar hacia abajo y hacia dentro, suelte el pestillo «E».

Tire de la columna de dirección hacia arriba y sobre el asa de transporte hasta que encaje en su sitio.

Suelte la rueda delantera con un fuerte tirón o giro.

### PASO 3 - DESPLEGAR Y BLOQUEAR



Tire de la rueda hacia la posición delantera y baje el scooter con cuidado hasta el suelo.

Tire de la columna de dirección hacia arriba y asegúrese de que la llave de la columna encaje en su sitio bajo el pestillo «A».

Tire del asiento hacia arriba y empuje los reposapiés hacia abajo.

## CÓMO EMPEZAR

## CÓMO FUNCIONAR



Para encender el scooter, inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj desde la posición de las 9 a las 11. El acelerador está situado en la empuñadura derecha. El freno es manual y se encuentra junto a la empuñadura izquierda. El voltaje se muestra en la pantalla digital, recuerde recargar cada 3 meses o cuando el indicador muestre 24v o menos.



Para cargarla, conecte el cable de alimentación al puerto de carga situado en la batería. También hay un puerto USB para cargar y alimentar un teléfono móvil.



Para extraer la batería, desbloquéela con la llave y levántela suavemente hacia arriba.

\*Llaves encontradas en la bolsa gris del asiento

## PASO 1 - ABATIR EL RESPALDO Y LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

### CÓMO PLEGAR Y GUARDAR



Baje el asiento y coloque los reposapiés en posición vertical.



Presione y suelte el pestillo «A», abatiendo la columna de dirección contra el asiento.



Levante el scooter a una posición vertical y bloquee la rueda delantera plana en su imán en el marco.



Localice el pestillo «D» y presione mientras apoya la columna de dirección.

## PASO 2 - PLEGAR Y BLOQUEAR EL SCOOTER



Baje la columna de dirección sobre el asa de transporte.



Presione la columna de dirección en el bastidor hasta que se bloquee el pestillo «E».



Presione el manillar contra el cuadro hasta que el imán lo bloquee en su sitio.



Presione y mantenga presionados los pestillos «B» y «C» y pliegue el asa de transporte hacia abajo.

Tenga en cuenta que este folleto es sólo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al +44 800 915 0800 o envíe un correo electrónico a [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com).