




Avant de l'utiliser, placez l'eFOLDi Explorer dans un endroit ouvert, à l'écart des animaux domestiques et des jeunes enfants. Le dépliage est facile et, avec de l'entraînement, vous pouvez l'installer en quelques secondes. Nous vous recommandons de vous entraîner avant votre première sortie.



COMMENT DÉPLIER


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE EN BAGAGE À ROULETTES

Retirez tous les emballages avant de commencer. Le chargeur se trouve dans la pochette en polystyrène et les clés dans la pochette du dossier du siège de l'Explorer.

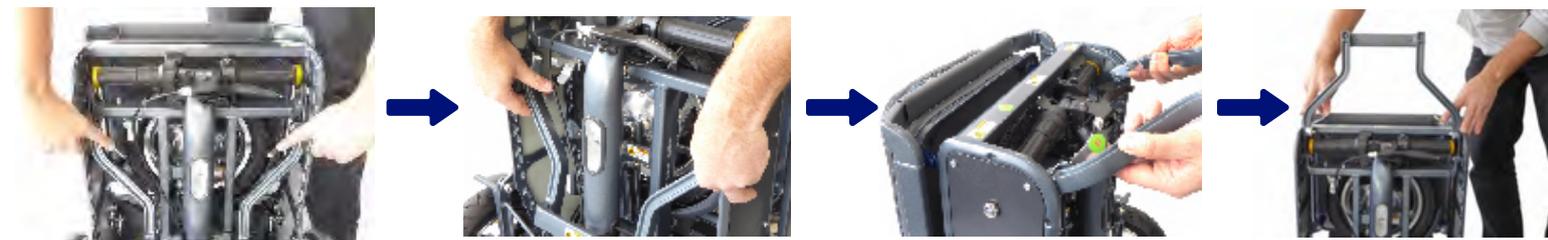

Localisez les loquets « B » et « C ». Appuyez sur ces loquets et tirez la poignée de traînage/transport en position verticale.

ÉTAPE 2 - DÉGAGER LA COLONNE DE DIRECTION

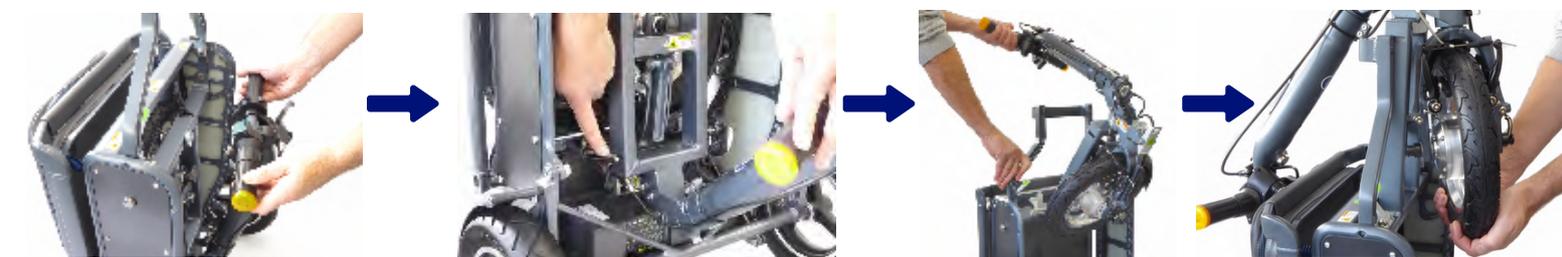

Relâchez le guidon en le tirant vers vous.

Tout en poussant le guidon vers le bas et vers l'intérieur, libérez le loquet « E ».

Tirez la colonne de direction vers le haut et sur la poignée de transport jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Relâcher la roue avant en tirant ou en tournant brusquement.

ÉTAPE 3 - DÉPLIER ET VERROUILLER



Tirez la roue vers l'avant et abaissez le scooter avec précaution sur le sol.

Tirez la colonne de direction vers le haut et assurez-vous que la clé de la colonne s'enclenche sous le loquet « A ».

Tirez le siège vers le haut et poussez les repose-pieds vers le bas.

COMMENT FONCTIONNER

POUR COMMENCER



Pour mettre le scooter en marche, insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, de la position 9 à 11 heures. L'accélérateur se trouve sur la poignée droite. Le frein est manuel et se trouve à côté de la poignée gauche. La tension est indiquée sur l'écran numérique. N'oubliez pas de recharger le scooter tous les 3 mois ou lorsque la jauge affiche 24 V ou moins.



Pour charger, connectez le câble d'alimentation au port de charge situé sur la batterie. Un port USB permet également de charger et d'alimenter un téléphone portable.



Pour retirer la batterie, déverrouillez-la à l'aide de la clé et soulevez-la délicatement vers le haut.

*Les clés ont été trouvées dans le sac de siège gris

COMMENT PLIER ET RANGER

ÉTAPE 1 - PLIER LE DOSSIER ET LA COLONNE DE DIRECTION



Rabattre le siège et les repose-pieds en position verticale.



Appuyer sur le loquet « A » et le relâcher, en rabattant la colonne de direction à plat contre le siège.



Soulevez le scooter en position verticale et verrouillez la roue avant à plat sur son aimant dans le cadre.



Localisez le loquet « D » et appuyez dessus tout en soutenant la colonne de direction.

ÉTAPE 2 - FERMETURE ET VERROUILLAGE DU SCOOTER



Abaisser la colonne de direction sur la poignée de transport.



Pousser la colonne de direction dans le cadre jusqu'à ce que le loquet « E » se verrouille.



Pressez le guidon contre le cadre jusqu'à ce que l'aimant le verrouille en place.



Appuyez sur les loquets « B » et « C » et maintenez-les enfoncés, puis rabattez la poignée de transport vers le bas.

Veillez noter que ce dépliant n'est qu'un guide rapide. Pour des instructions complètes, veuillez vous référer à notre manuel d'utilisation.

Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au +44 800 915 0800 ou nous envoyer un courriel à services@efoldi.com.