

eFOLDi Hurtigstartveiledning for Explorer



Før du bruker eFOLDi Explorer, må du plassere den i et åpent område, borte fra kjæledyr og små barn. Det er enkelt å brette den ut, og med litt øvelse kan du sette den opp på få sekunder.

Vi anbefaler at du øver deg før første utflukt.



**SLIK
FALLER
DU UT**

TRINN 1 - SETT SAMMEN TIL RULLENDE BAGASJE

Fjern all emballasje før du begynner. Laderen ligger i isoporforingen, og nøklene ligger i Explorer-setets ryggsekk.



Finn låsene «B» og «C». Trykk på dem og trekk slepe-/bærehåndtaket i oppreist stilling.

TRINN 2 - FRIGJØR RATTSTAMMEN



Slipp styret ved å trekke det mot deg.

Løsne «E»-låsen mens du skyver styret nedover og innover.

Trekk rattstammen opp og over bærehåndtaket til den låses på plass.

Slipp forhjulet med et kraftig rykk eller vri.

STEP 3 - UNFOLD AND LOCK




Trekk hjulet til fremre posisjon og senk scooteren forsiktig ned på bakken.

Trekk rattstammen opp og sørg for at rattstammenøkkelen låses på plass under låsen «A».

Trekk setet opp og skyv fotpinnene ned.

KOMME I GANG

HVORDAN BRUKER DU

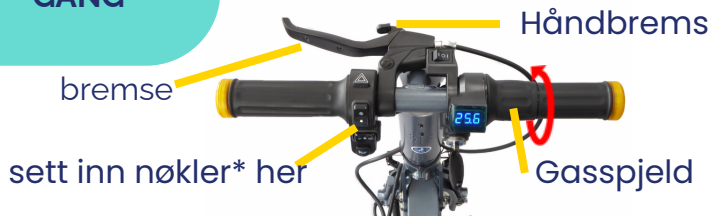

For å slå på scooteren setter du inn nøkkelen og vrir den med klokken fra klokken 9 til 11. Vridgassen sitter på høyre håndtak. Bremsen er manuell og plassert ved siden av venstre håndtak. Spenningen vises i det digitale displayet, husk å lade hver 3. måned eller når måleren viser 24 V eller mindre.



For å lade kobler du strømforsyningskabelen til ladeporten på batteriet. Det finnes også en USB-port for lading og strømforsyning av mobiltelefonen.



Ta ut batteriet ved å låse det opp med nøkkelen og løfte det forsiktig oppover.

*Nøkler funnet i grå setepose

HVORDAN BRYTE


TRINN 1 - BRETT RYGGSTØTTEN OG RATTSTAMMEN



Vipp setet ned og sett fotpinnene i oppreist stilling.



Trykk på og slipp låsen «A», slik at rattstammen foldes flatt mot setet.

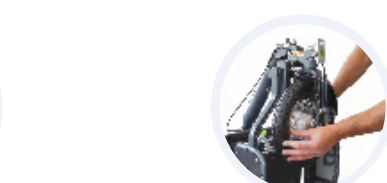

Løft sparkesykkelen til oppreist stilling og lås forhjulet flatt på magneten i rammen.



Finn lås «D» og trykk på den mens du støtter rattstammen.

TRINN 2 - SLÅ SAMMEN OG LÅS SCOOTEREN



Senk rattstammen over bærehåndtaket.



Trykk rattstammen inn i rammen til låsen «E» låses.



Trykk styret mot rammen til magneten låser det på plass.



Trykk på og hold låsene «B» og «C» inne, og brett ned bærehåndtaket.

Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en kortfattet veiledning. For fullstendige instruksjoner, se produkthåndboken. Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss på +44 800 915 0800 eller sende en e-post til services@efoldi.com