




Pred uporabo postavite napravo eFOLDi Lite na odprto mesto, kjer ni domačih živali in majhnih otrok. Razstavljanje je enostavno in z vajo ga lahko postavite v nekaj sekundah.

Priporočamo, da se pred prvim izletom vadite.

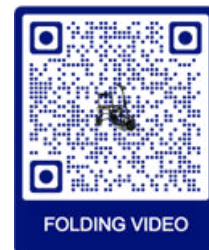

FOLDING VIDEO

KAKO RAZVIJATI

KORAK 1 - SPROSTITEV VOLANSKEGA DROGA

Pred začetkom dela odstranite vso embalažo.



S pritiskom na rumeno zaporo sprostite volanski drog in ga sprostite.

Krmilo dvignite navzven in navzgor, dokler se ne zaskoči v navpični položaj.

KORAK 2 - ODKLEPANJE IN ODPIRANJE



Držite volanski drog, poiščite majhno rumeno stikalo na strani Lite in ga povlecite, da odklenete sklop prednjega kolesa.

Držite volanski drog in naslonjalo sedeža ter ju potegnite narazen. Skuter se bo razvil in zaslišali boste klik, ko se bo zaklenil v odprtem položaju.

KORAK 3 - KONČNI VARNOSTNI PREGLEDI



Prepričajte se, da so zaklepne ključavnice varno pritrjene na jekleno palico, tako da z nogo pritisnete na podnožje.



Preverite, ali je rdeča ročica magnetne zavore v položaju LOCKED, da se motor zaskoči.

ZAČENJAMO Z DELOM



Če želite vklopiti skuter, pritisnite sivi gumb pod zaslonom baterije. Izberite (D) za vožnjo ali (R) za vzvratno vožnjo, nato pa pritisnite gumb za plin, da se peljete. Ne pozabite ponovno napolniti baterije, ko se na zaslonu prikaže oranžna barva.

KAKO OPRAVLJATI



Če želite skuter spremeniti v potujočo prtljago, potegnite ročico navzgor in pritisnite rumeno ročico ter jo pritrdite na drugo točko zaustavitve.



Za polnjenje priključite napajalni kabel na polnilno vtičnico na vrhu volanskega droga.



Če želite odstraniti baterijo, dvignite zapah in ga previdno potegnite navzgor.

Polnilna vrata so na strani baterije.

KAKO ZLOŽITI

KORAK 1 - ZLOŽITE NASLONJALO IN VOLANSKI DROG



Naslonjalo sedeža zložite do ravnega roba osnove sedeža.



Pritisnite in držite majhno rumeno zaporo na sprednji strani volanskega droga, nato pa jo zložite navzdol do ročaja, dokler se ne zaskoči in pritrdi z magnetom.



Z nameščenimi nasloni za roke, potegnite črno stikalo, da sprostite sedež in ga zložite.

KORAK 2 - ZLOŽITE IN ZAKLENITE SKUTER



Skuter primite za krmilni steber in ročaj za prenašanje ter dvignite okvir sedeža v pokončen položaj.



Skuter nagnite nazaj pod kotom (po potrebi lahko z nogo za kolesom poskrbite za stabilnost) in ga uravnotežite na kolesčkih.



Pritisnite volanski drog navznoter, dokler prednje kolo in zapah ne zaskočita na svoje mesto. Nato stolpec močno potisnite, da se tesno pritrdi na okvir.



Upoštevajte, da je ta brošura namenjena le kot kratek vodnik. Za popolna navodila glejte navodila za uporabo izdelka. Če imate kakršnakoli vprašanja, nas pokličite na +44 800 915 0800 ali nam pišite na services@efoldi.com.