



Prima dell'uso, posizionare l'eFOLDi Explorer in un'area aperta, lontano da animali domestici e bambini piccoli. Lo srotolamento è facile e, con la pratica, è possibile installarlo in pochi secondi.


Si consiglia di fare pratica prima della prima uscita.



COME
SVOLGERE

FASE 1 - ASSEMBLARE IL BAGAGLIO A MANO

Prima di iniziare, rimuovere tutti gli imballaggi. Il caricabatterie si trova nella fodera di polistirolo e le chiavi nella borsa dello schienale dell'Explorer.

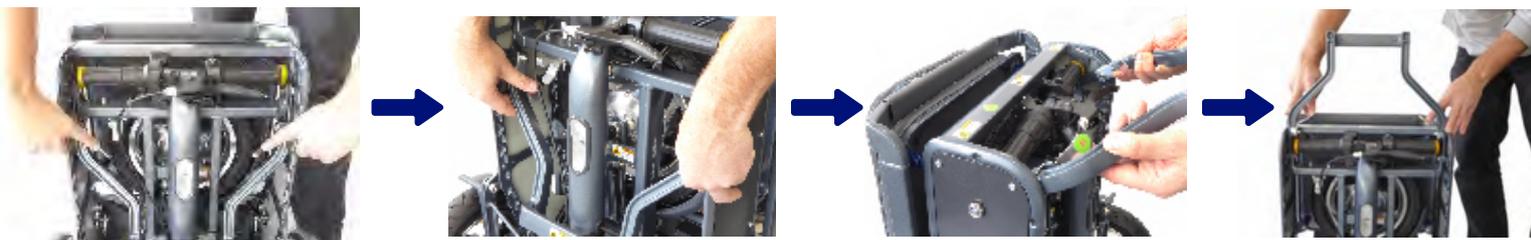

Individuare i fermi "B" e "C". Premerli e tirare la maniglia di trascinamento in posizione verticale.

FASE 2 - SBLOCCARE IL PIANTONE DELLO STERZO



Rilasciare il manubrio tirandolo verso di sé.

Spingendo il manubrio verso il basso e verso l'interno, rilasciare il fermo "E".

Tirare il piantone dello sterzo verso l'alto e sopra la maniglia di trasporto finché non si blocca in posizione.

Rilasciare la ruota anteriore con una brusca trazione o torsione.

FASE 3 - DISPIEGARE E BLOCCARE



Tirare la ruota in posizione anteriore e abbassare con cautela lo scooter a terra.

Tirare il piantone dello sterzo in posizione verticale e verificare che la chiave del piantone si blocchi in posizione sotto il fermo "A".

Tirare il sedile in posizione verticale e spingere le pedane verso il basso.

INIZIARE A LAVORARE

COME FUNZIONA



Per accendere lo scooter, inserire la chiave e girare in senso orario dalla posizione 9 alla 11.

L'acceleratore a rotazione si trova sulla maniglia destra. Il freno è manuale e si trova accanto alla maniglia sinistra. La tensione è indicata sul display digitale; ricordarsi di ricaricarla ogni 3 mesi o quando l'indicatore mostra 24v o meno.



Per la ricarica, collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica situata sulla batteria. È presente anche una porta USB per caricare e alimentare un telefono cellulare.



Per rimuovere la batteria, sbloccarla con la chiave e sollevarla delicatamente verso l'alto.

*Le chiavi sono state trovate nella borsa grigia del sedile

FASE 1 - RIPIEGARE LO SCHIENALE E IL PIANTONE DELLO STERZO

COME PIEGARE E CONSERVARE



Ripiegare il sedile e le pedane in posizione verticale.



Premere e rilasciare il fermo "A", ripiegando il piantone dello sterzo contro il sedile.



Sollevare il monopattino in posizione verticale e bloccare la ruota anteriore in piano sul suo magnete nel telaio.



Individuare il fermo "D" e premere sostenendo il piantone dello sterzo.

FASE 2 - CHIUDERE E BLOCCARE LO SCOOTER



Abbassare il piantone dello sterzo sulla maniglia di trasporto.



Premere il piantone dello sterzo nel telaio finché il fermo "E" non si blocca.



Premere il manubrio contro il telaio finché il magnete non lo blocca in posizione.



Tenere premuti i fermi "B" e "C" e ripiegare la maniglia di trasporto.

Si prega di notare che questo opuscolo è solo una guida rapida. Per le istruzioni complete, consultare il manuale d'uso del prodotto. Per qualsiasi domanda, chiamateci al numero +44 800 915 0800 o inviate un'e-mail a services@efoldi.com.