

eFOLDi Skrócona instrukcja obsługi Explorer



Przed użyciem należy umieścić eFOLDi Explorer na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci. Rozkładanie jest łatwe, a dzięki praktyce można je ustawić w kilka sekund. Zalecamy poćwiczenie przed pierwszą wycieczką.



JAK SIĘ ROZŁOŻYĆ

KROK 1 - ZŁOŻENIE W ZWIJANY BAGAŻ

Przed rozpoczęciem należy usunąć wszystkie opakowania. Ładowarka znajduje się w styropianowej wyściółce, a kluczyki w torbie na oparciu fotela Explorer.



Zlokalizuj zatrzaski „B” i „C”. Naciśnij je i pociągnij uchwyt do przenoszenia do pozycji pionowej.

KROK 2 - ODBLOKOWANIE KOLUMNY KIEROWNICY



Zwolnij kierownicę, pociągając ją do siebie.

Popychając kierownicę w dół i do wewnątrz, zwolnij zatrzask „E”.

Pociągnij kolumnę kierownicy w górę i nad uchwyt do przenoszenia, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Zwolnij przednie koło gwałtownym pociągnięciem lub skręceniem.

KROK 3 - ROZŁOŻENIE I ZABLOKOWANIE



Pociągnij koło do przodu i ostrożnie opuść hulajnogę na ziemię.

Pociągnij kolumnę kierownicy do góry i upewnij się, że klucz do kolumny zablokował się pod zatrzaskiem „A”.

Pociągnij siedzenie do pionu i opuść podnóżki.

SPOSÓB DZIAŁANIA

ROZPOCZĘCIE



Aby włączyć hulajnogę, należy włożyć kluczyk i przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara z pozycji na godzinie 9 do 11. Obrotowa przepustnica znajduje się na prawej manetce. Hamulec jest ręczny i znajduje się obok lewej rączki. Napięcie jest wyświetlane na wyświetlaczu cyfrowym, należy pamiętać o ładowaniu co 3 miesiące lub gdy wskaźnik pokazuje 24 V lub mniej.



W celu naładowania należy podłączyć kabel zasilający do portu ładowania znajdującego się na akumulatorze.

Dostępny jest również port USB do ładowania i zasilania telefonu komórkowego.



Aby wyjąć baterię, należy odblokować ją za pomocą kluczyka i delikatnie podnieść do góry.

*Kluczyki znalezione w szarej torbie na siedzeniu

SPOSÓB SKŁADANIA


KROK 1 - SKŁADANIE OPARCIA I KOLUMNY KIEROWNICY



Opuść siedzenie i ustaw podnóżki w pozycji pionowej.



Naciśnij i zwolnij zatrzask „A”, składając kolumnę kierownicy płasko na siedzeniu.

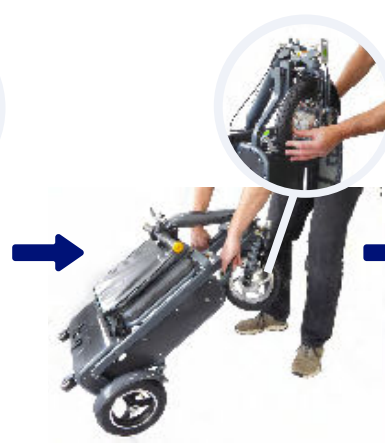

Podnieś hulajnogę do pozycji pionowej i zablokuj przednie koło płasko na magnesie w ramie.




Zlokalizuj zatrzask „D” i naciśnij go, podpierając kolumnę kierownicy.

KROK 2 - ZŁOŻENIE I ZABLOKOWANIE HULAJNOGI



Opuść kolumnę kierownicy na uchwyt do przenoszenia.

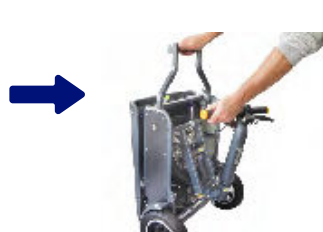

Wciśnij kolumnę kierownicy do ramy, aż zatrzask „E” zablokuje się.



Dociśnij kierownicę do ramy, aż magnes zablokuje ją na miejscu.



Naciśnij i przytrzymaj zatrzaski „B” i „C” i złoż uchwyt do przenoszenia.

Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma służyć wyłącznie jako skrócona instrukcja. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi produktu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +44 800 915 0800 lub e-mailowy pod adresem services@efoldi.com.