

# eFOLDi Guia de início rápido do Explorer



Antes de utilizar, coloque o eFOLDi Explorer numa área aberta, longe de animais de estimação e crianças pequenas. O desdobramento é fácil e, com prática, pode ser montado em segundos.


Recomendamos que pratique antes do seu primeiro passeio.



## COMO DESDOBRAR


### ETAPA 1 - MONTAGEM DA BAGAGEM ROLANTE

Retire todas as embalagens antes de começar. O carregador encontra-se no invólucro de poliestireno e as chaves estão no saco das costas do banco do Explorer.

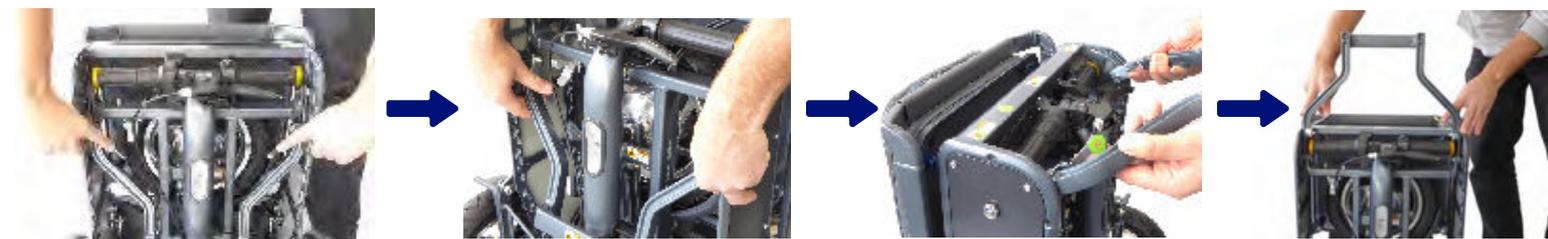

Localize os fechos "B" e "C". Prima-os e puxe a pega de arrasto/transporte para a posição vertical.

### PASSO 2 - LIBERTAR A COLUNA DE DIRECÇÃO

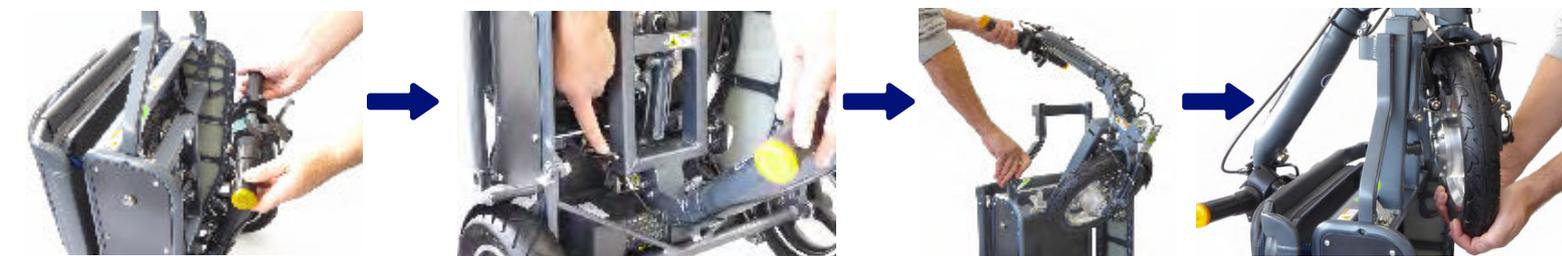

Solte o guiador, puxando-o na sua direção.

Enquanto empurra o guiador para baixo e para dentro, solte o trinco "E".

Puxe a coluna de direção para cima e sobre a pega de transporte até que esta encaixe no lugar.

Solte a roda dianteira com um puxão ou uma torção brusca.

### PASSO 3 - DESDOBRAR E BLOQUEAR



Puxe a roda para a frente e baixe a scooter cuidadosamente para o chão.

Puxe a coluna de direção para cima e certifique-se de que a chave da coluna encaixa no trinco "A".

Puxe o assento na vertical e empurre os pés para baixo.

# COMO FUNCIONAR

## COMEÇAR



**Para ligar a scooter,** introduza a chave e rode no sentido dos ponteiros do relógio da posição das 9 às 11 horas. O acelerador rotativo encontra-se no punho direito. O travão é manual e está localizado ao lado do punho esquerdo. A tensão é mostrada no ecrã digital, lembre-se de recarregar a cada 3 meses ou quando o indicador mostrar 24v ou menos.



**Para carregar,** ligue o cabo de alimentação à porta de carregamento situada na bateria. Existe também uma porta USB para carregar e alimentar um telemóvel.



**Para retirar a bateria,** desbloqueie-a com a chave e levante-a suavemente para cima.  
  
\*Chaves encontradas no saco cinzento do banco

## COMO DOBRAR E GUARDAR

### PASSO 1 - DOBRAR O ENCOSTO E A COLUNA DE DIRECÇÃO



Dobre o encosto do banco para baixo e os pés para a posição vertical.



Pressione e solte o trinco "A", dobrando a coluna de direção contra o banco.



Levante a scooter para uma posição vertical e bloqueie a roda dianteira no seu íman na estrutura.



Localizar o trinco "D" e pressionar enquanto se apoia a coluna de direção.

### PASSO 2 - RECOLHER E BLOQUEAR A SCOOTER



Baixar a coluna de direção sobre a pega de transporte.



Pressionar a coluna de direção para dentro da estrutura até que o trinco "E" bloqueie.



Pressione o guidão contra o quadro até que o íman o fixe no lugar.



Prima e mantenha premidos os fechos "B" e "C" e dobre a pega de transporte para baixo.

Este folheto destina-se a ser apenas um guia rápido. Para obter instruções completas, consulte o manual do utilizador do produto.

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos através do número +44 800 915 0800 ou envie um e-mail para [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com)