

eFOLDi Explorer Snabbstartsguide



Placera eFOLDi Explorer på en öppen plats, utom räckhåll för husdjur och små barn, innan du börjar använda den. Det är lätt att fälla ut och med lite övning kan du sätta upp den på några sekunder. Vi rekommenderar att du övar innan din första utflykt.



HUR MAN VIKER UPP


STEG 1 - MONTERA IHOP TILL RULLANDE BAGAGE

Ta bort allt emballage innan du börjar. Laddaren är placerad i polystyrenfodralet och nycklarna är i Explorer-sätesryggsäcken.



Leta reda på "B"- och "C"-spärrarna. Tryck på dem och dra drag-/bärhandtaget i upprätt läge.

STEG 2 - LOSSA RATTSTÅNGEN

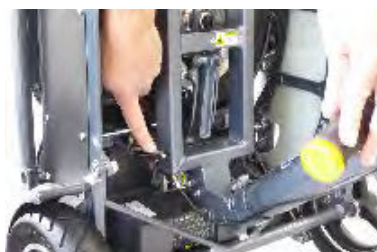

Släpp styret genom att dra det mot dig.

Lossa spärren "E" samtidigt som du trycker styret nedåt och inåt.

Dra rattstången uppåt och över bärhandtaget tills den låses fast.

Släpp framhjulet med ett kraftigt ryck eller en kraftig vridning.

STEG 3 - VIK UT OCH LÅS



Dra hjulet till det främre läget och sänk försiktigt ner scootern till marken.

Dra rattstången uppåt och kontrollera att rattstångsnyckeln låses fast under spärren "A".

Dra sätet uppåt och tryck ner fotpinnarna.

KOMMA IGÅNG

HUR MAN ANVÄNDER



För att sätta på scootern, sätt i nyckeln och vrid medurs från klockan 9 till 11. Vridgasreglaget sitter på höger handtag. Bromsen är manuell och sitter vid sidan av det vänstra handtaget. Spänningen visas i den digitala displayen, kom ihåg att ladda var 3:e månad eller när mätaren visar 24 V eller mindre.



För att ladda, anslut strömförsörjningskabeln till laddningsporten på batteriet. Det finns också en USB-port för laddning och strömförsörjning av en mobiltelefon.



Ta ut batteriet genom att låsa upp det med nyckeln och lyfta det försiktigt uppåt.

*Nycklar hittades i grå säteväska

HUR MAN VIKER OCH FÖRVARAR


STEG 1 - FÄLL RYGGSTÖDET OCH RATTSTÅNGEN



Fäll tillbaka sätet och ställ fotpinnarna i upprätt läge.



Tryck in och släpp spärren "A" så att rattstången fälls platt mot sätet.

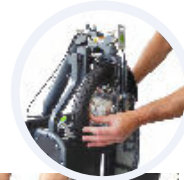

Lyft scootern till ett upprätt läge och lås fast framhjulet platt på sin magnet i ramen.



Leta reda på spärren "D" och tryck samtidigt som du stöder rattstången.

STEG 2 - FÄLL IHOP OCH LÅS SCOOTERN



Sänk ner rattstången över bärhandtaget.



Tryck in rattstången i ramen tills spärren "E" låser.



Tryck styret mot ramen tills magneten låser fast det.



Tryck och håll in spärren "B" och "C" och fäll ner bärhandtaget.

Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, vänligen se vår produktmanual för användaren. Om du har några frågor, vänligen ring oss på +44 800 915 0800 eller skicka ett e-postmeddelande till services@efoldi.com