

eFOLDi Priročnik za hitri zagon Explorera



Pred uporabo postavite napravo eFOLDi Explorer na odprto mesto, kjer ni domačih živali in majhnih otrok. Razstavljanje je preprosto in z vajo ga lahko postavite v nekaj sekundah.

Priporočamo, da se pred prvim izletom vadite.



KAKO RAZVIJATI

KORAK 1 - SESTAVITE V TEKOČO PRTLJAGO

Remove all packaging before you begin. The charger is located in the polystyrene liner and the keys are in the Explorer seat back bag.



Poiščite zapahi „B“ in „C“. Pritisnite ju in potegnite ročaj za vlečenje/nosenje v pokončni položaj.

KORAK 2 - SPROSTITEV VOLANSKEGA DROGA



Sprostite krmilo tako, da ga potegnete proti sebi.

Med potiskanjem krmila navzdol in navznoter sprostite zapah „E“.

Potegnite volanski drog navzgor in čez ročaj za prenašanje, dokler se ne zaskoči.

Spustite sprednje kolo z močnim potegom ali zasukom.


KORAK 3 - RAZGRNITE IN ZAKLENITE



Potegnite kolo v sprednji položaj in skuter previdno spustite na tla.

Potegnite volanski drog navpično in se prepričajte, da se ključ droga zaklene pod zapahom „A“.

Potegnite sedež navpično in potisnite stopalko navzdol.

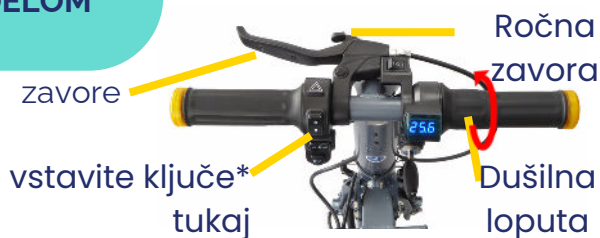

Če želite vklopiti skuter, vstavite ključ in ga zavrtite v smeri urinega kazalca od 9. do 11. ure. Vrtljivi plin je na desnem ročaju. Zavora je ročna in se nahaja ob levem ročaju. Napetost je prikazana na digitalnem zaslonu, ne pozabite napolniti baterije vsake 3 mesece ali ko merilnik pokaže 24 V ali manj.



Če želite polniti, priključite napajalni kabel na vrata za polnjenje na bateriji. Na voljo je tudi vhod USB za polnjenje in napajanje mobilnega telefona.



Če želite odstraniti baterijo, jo odklenite s ključem in nežno dvignite navzgor.

*Ključ najdeni v sivi sedežni torbi

**KAKO
ZLOŽITI**


KORAK 1 - ZLOŽITE NASLONJALO IN VOLANSKI DROG



Sedež zložite nazaj navzdol, stopalke pa postavite v pokončen položaj.



Pritisnite in sprostite zapah „A“ ter zložite volanski drog ravno ob sedež.

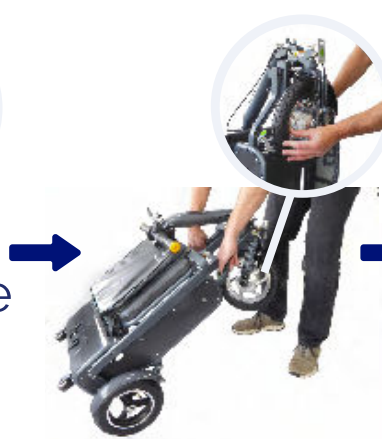

Dvignite skuter v pokončen položaj in sprednje kolo pritrdite na magnet v okvirju.




Poiščite zapah „D“ in ga pritisnite, medtem ko podpirate volanski drog.

KORAK 2 - ZLOŽITE IN ZAKLENITE SKUTER



Spustite volanski drog čez ročaj za prenašanje.

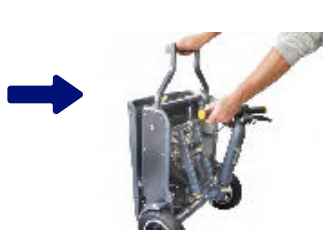

Volanski drog pritisnite v okvir, dokler se zapah „E“ ne zaskoči.



Krmilo pritisnite na okvir, dokler ga magnet ne zaskoči.



Pritisnite in držite zapahi „B“ in „C“ ter zložite ročaj za prenašanje navzdol.