

eFOLDi® Priročnik za hitri zagon Navigatorja



Pred uporabo postavite napravo eFOLDi Navigator na odprto mesto, stran od domačih živali in majhnih otrok. Razstavljanje je enostavno in z vajo ga lahko nastavite v nekaj sekundah.

Priporočamo, da vadite pred prvim izletom.



KAKO RAZVIJATI



Vaš eFOLDi Navigator ima torbico za dodatke. V njej boste našli kolesa proti prevračanju, polnilec baterije in dodatne ročaje.

Zunanjo škatlo položite ravno in pred sestavljanjem z naprave Navigator odstranite vso embalažo.



Postavite stol pokonci in odvijte sponko varnostnega pasu, ki stol pritrdjuje v zloženem položaju.



Stol razstavite tako, da potisnete sedež navzdol.



Vstavite kolesa proti prevračanju v zadnji del okvirja stola tako, da so vzmetni gumbi obrnjeni navznoter.



Ročice namestite tako, da jih potisnete navzdol, dokler ne zaslišite klika in dokler se rdeči gumb ne zaskoči.



Vstavite palico krmilne palice pod naslonjalo za roke in zelo dobro zategnite gumb.



Namestite ročaje za pomočnike tako, da jih privijete v zgornji del okvirja stola.



Na zgornji del okvirja stola pritrdite upravljalnik spremljevalca.



Napajalni kabel priključite na baterijo tako, da premaknete pokrov vrat in vstavite napajalni kabel.



Potisnite naslon za noge navzdol.



Nedrsečo blazino namestite na sedež (s čepasto stranjo navzdol) in jo pritrdite z Velcro zavihki.



Rdeči zavorni ročici sta nastavljeni v položaj za vožnjo naprej, ki vključuje motor. Za način prostega kolesa povlecite obe ročici v položaj nazaj.



Vklopite gumb za vklop, več informacij najdete v uporabniškem priročniku.



PRIPRAVLJENO NA VELJAJTE!




Na krmilniku slušalke so gumbi za nastavitve hitrosti, 5 stopenj moči in 5 nastavitve hitrosti (1 = nizka, 5 = visoka).

Če želite izklopiti zvok vzratne vožnje, preprosto pritisnite gumb (prikazan zgoraj).



Upravljalnik za spremljevalca prilagaja hitrost hoje za vašega pomočnika in omogoča preverjanje baterije, z ročico za gibanje naprej in nazaj.

POLNJENJE BATERIJE

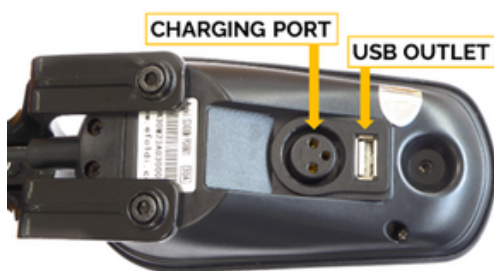

Polnilna vrata so pod telefonom, na voljo pa je tudi vtičnica USB za napajanje naprav.



Če želite napolniti napravo eFOLDi Navigator, priključite polnilnik v podstavek joysticka in priključite vtič za izmenični tok v električno vtičnico. Lahko pa odstranite baterijo in jo napolnite ločeno - po potrebi stolček pustite v avtomobilu.

KAKO ZLOŽITI ZA SHRANJEVANJE



Z gumbom POWER na ročnem upravljalniku izklopite stol, ko ga ne uporabljate, da prihranite energijo baterije.



Podstavek za noge zložite navzgor.



Pritisnite ročico za zlaganje (nahaja se pod sprednjim robom sedeža) in dvignite sedež, da se zloži nazaj.



Stol namestite nazaj na kolesa proti prevračanju in ga shranite.



Upoštevajte, da je ta brošura namenjena le kot kratek vodnik. Za popolna navodila glejte navodila za uporabo izdelka. Če imate kakršnakoli vprašanja, nas pokličite na +44 800 915 0800 ali nam pišite na hello@efoldi.com.