

eFOLDi® Navigator Schnellstartanleitung



Stellen Sie den eFOLDi Navigator vor der Benutzung in einem offenen Bereich auf, der von Haustieren und kleinen Kindern ferngehalten wird. Das Entfalten ist einfach, und mit etwas Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle aufstellen. Wir empfehlen, vor Ihrem ersten Ausflug zu üben.



WIE ENTFALTEN

Ihr eFOLDi Navigator hat eine Zubehörtasche. Darin finden Sie die Anti-Kipp-Räder, ein Batterieladegerät und optionale Griffe..



Legen Sie den Umkarton flach und entfernen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Verpackung des Navigators.



Stellen Sie den Stuhl auf und lösen Sie den Sicherheitsgurt, mit dem der Stuhl in seiner zusammengeklappten Position befestigt ist.



Klappen Sie den Stuhl auf, indem Sie den Sitz nach unten schieben.



Setzen Sie die Anti-Kipp-Räder so in die Rückseite des Stuhlrahmens ein, dass die gefederten Knöpfe nach innen zeigen.



Installieren Sie die Arme, indem Sie sie nach unten drücken, bis Sie ein Klicken hören und der rote Knopf einrastet.



Schieben Sie die Joystickstange unter die Armlehne und ziehen Sie den Knopf fest an.



Montieren Sie die Griffe der Begleitperson, indem Sie sie oben in den Stuhlrahmen schrauben.



Befestigen Sie die Begleitpersonenkontrolle oben am Stuhlrahmen.



Schließen Sie das Stromkabel an den Akku an, indem Sie die Anschlussabdeckung aufschieben und das Stromkabel einstecken.



Drücken Sie die Fußstütze nach unten.



Legen Sie das rutschfeste Kissen auf den Sitz (mit der wabbeligen Seite nach unten) und befestigen Sie es mit den Klettverschlusslaschen.



Die roten Bremshebel befinden sich in der Vorwärtsposition, die den Motor einrasten lässt. Für den Freilaufmodus ziehen Sie beide Hebel in die Rückwärtsposition.



Schalten Sie den Netzschalter ein; weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

BEREIT ZU ROLLEN!




Der Handregler verfügt über Tasten zum Einstellen der Geschwindigkeit, mit 5 Leistungsstufen und 5 Geschwindigkeitsstufen (1 = niedrig, 5 = hoch).

Um das Rückfahrgeräusch zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Taste (siehe oben).



Die Begleitsteuerung passt die Gehgeschwindigkeit für Ihren Assistenten an und bietet eine Batteriekontrolle, mit einem Hebel für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.

BATTERIEA- UFLADUNG

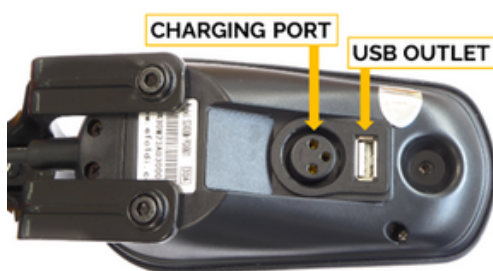

Der Ladeanschluss befindet sich unter dem Hörer, und es gibt auch eine USB-Buchse für die Stromversorgung von Geräten.



Um den eFOLDi Navigator aufzuladen, stecken Sie das Ladegerät in die Joystick-Basis und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose. Alternativ können Sie den Akku entfernen und ihn separat aufladen - lassen Sie den Stuhl bei Bedarf in Ihrem Auto.

WIE MAN SIE ZUM AUFBEWAH- REN FALTET



Verwenden Sie die POWER-Taste an der Handsteuerung, um den Stuhl auszuschalten, wenn er nicht benutzt wird, um den Akku zu schonen.



Klappen Sie die Fußstütze hoch.



Drücken Sie den Klapphebel (unter der Vorderkante des Sitzes) und heben Sie den Sitz an, um ihn nach hinten zu klappen.



Setzen Sie den Stuhl zum Verstauen wieder auf die kippbaren Räder.



Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt nur als Kurzanleitung gedacht ist. Eine vollständige Anleitung finden Sie in unserem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter +44 800 915 0800 an oder senden Sie eine E-Mail an hello@efoldi.com.