

eFOLDi® Navigator Quick Start Guide



Før du bruker eFOLDi Navigator, må du plassere den i et åpent område, borte fra kjæledyr og små barn. Det er enkelt å brette den ut, og med litt øvelse kan du sette den opp på få sekunder.

Vi anbefaler at du øver deg før den første turen.



SLIK FALLER DU UT



eFOLDi Navigator har en tilbehørspose. Inni den finner du antitipphjulene, en batterilader og valgfrie håndtak.



Legg ytterkartongen flatt og fjern all emballasje fra Navigator før montering.



Reis stolen opp og løsne sikkerhetsbeltet som fester stolen i sammenfoldet posisjon.



Brett ut stolen ved å skyve setet ned.



Sett tippesikringshjulene inn i stolrammens bakside med de fjærende knappene vendt innover



Monter armene ved å skyve dem ned til du hører et klikk og den røde knappen låses.



Før styrespaken inn under armlenet, og stram knotten godt til.



Monter ledsagerhåndtakene ved å skru dem fast i toppen av stolrammen.



Fest ledsagerkontrollen på toppen av stolrammen.



Koble strømkabelen til batteriet ved å skyve på portdekselet og sette inn strømkabelen.



Skyv fotstøtten ned.



Plasser den skliske puten på setet (med den bobblete siden ned), og fest den med borrelåsflippene.



De røde bremsespakene er satt i foroverposisjon, noe som kobler inn motoren. For frihjulsmodus trekker du begge spakene bakover.



Slå på strømknappen, se brukerhåndboken for mer informasjon.

KLAR TIL ROLL!




Håndkontrollen har knapper for justering av hastighet, med 5 effektnivåer og 5 hastighetsinnstillinger (1 = lav, 5 = høy). For å deaktivere reverseringslyden trykker du ganske enkelt på knappen (vist ovenfor).



Ledsagerkontrollen justerer ganghastigheten for assistenten din og gir en batterikontroll, med en spak for bevegelse forover og bakover.

BATTERILA -DING

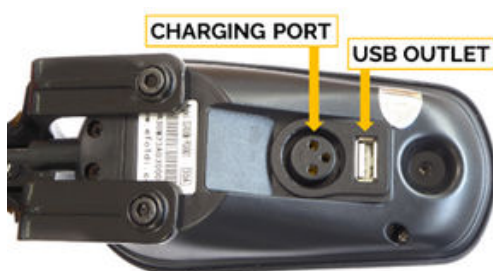

Ladeporten er plassert under håndsettet, og det finnes også et USB-uttak for strømtilførsel til enheter.



For å lade eFOLDi Navigator plugges du laderen inn i joystickbasen og kobler vekselstrømstøpselet til en stikkontakt. Alternativt kan du ta ut batteriet og lade det separat - og la stolen stå igjen i bilen hvis det er nødvendig.

HVORDAN BRYTE



Bruk POWER-knappen på håndkontrollen til å slå av stolen når den ikke er i bruk, for å spare på batteriet.



Brett fotstøtten opp.



Trykk på foldespaken (plassert under setets forkant) og løft setet for å folde det bakover.



Sett stolen tilbake på de tippesikre hjulene for oppbevaring.



Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en kortfattet veiledning. Du finner fullstendige instruksjoner i produkthåndboken. Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss på +44 800 915 0800 eller sende en e-post til hello@efoldi.com