

eFOLDi® Skrócona instrukcja obsługi Navigator



Przed użyciem należy umieścić urządzenie eFOLDi Navigator na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci. Rozkładanie jest łatwe, a dzięki praktyce można je skonfigurować w kilka sekund. Zalecamy poćwiczenie przed pierwszą wycieczką.



JAK SIĘ ROZŁOŻYĆ

Urządzenie eFOLDi Navigator jest wyposażone w torbę na akcesoria. Wewnątrz znajdują się kółka zapobiegające wywróceniu, ładowarkę baterii i opcjonalne uchwyty.

Położ karton zewnętrzny płasko i usuń wszystkie opakowania z urządzenia Navigator przed montażem.



Podnieść fotel i odpiąć zacisk pasa bezpieczeństwa zabezpieczający fotel w pozycji złożonej.



Rozłóż fotel, popychając siedzisko w dół.



Włóż kółka antywywrotne do tylnej części ramy fotela, tak aby sprężynujące przyciski były skierowane do wewnątrz.



Zamontuj ramiona, popychając je w dół do momentu usłyszenia kliknięcia i zablokowania czerwonego przycisku.



Włóż drążek joysticka pod podłokietnik i mocno dokręć pokrętło.



Zainstaluj uchwyty do obsługi, przykręcając je do górnej części ramy fotela.



Przymocuj element sterujący do górnej części ramy fotela.



Podłącz kabel zasilający do akumulatora, przesuwając pokrywę portu i wkładając kabel zasilający.



Popchnij podnóżek w dół.



Umieść antypoślizgową poduszkę na siedzeniu (wypukłą stroną do dołu), zabezpieczając ją rzepami.



Czerwone dźwignie hamulca są ustawione w pozycji do przodu, co powoduje włączenie silnika. W trybie wolnego koła należy pociągnąć obie dźwignie do tyłu.



Włącz przycisk zasilania, aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

GOTOWY DO ROLL!




Kontroler słuchawki posiada przyciski do regulacji prędkości, z 5 poziomami mocy i 5 ustawieniami prędkości (1 = niska, 5 = wysoka).

Aby wyłączyć dźwięk cofania, wystarczy nacisnąć przycisk (pokazany powyżej).



Kontroler asystenta dostosowuje prędkość chodzenia dla asystenta i umożliwia sprawdzenie stanu baterii, z dźwignią do poruszania się do przodu i do tyłu.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

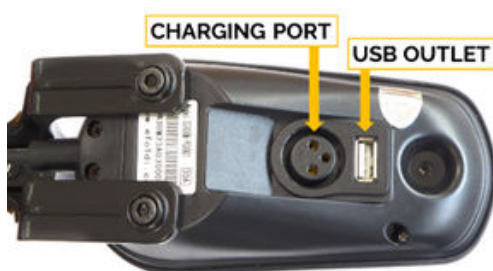

Port ładowania znajduje się pod słuchawką, a także gniazdo USB do zasilania urządzeń.



Aby naładować fotel eFOLDi Navigator, podłącz ładowarkę do podstawy joysticka i podłącz wtyczkę AC do gniazdka elektrycznego. Alternatywnie można wyjąć akumulator i ładować go osobno, pozostawiając fotel w samochodzie.

JAK ZŁOŻYĆ DO PRZECHOWYWANIA



Użyj przycisku ZASILANIE na kontrolerze ręcznym, aby wyłączyć fotel, gdy nie jest używany w celu oszczędzania energii akumulatora.



Złóż podnóżek do góry.



Naciśnij dźwignię składania (znajdującą się pod przednią krawędzią fotelika) i unieś fotelik, aby złożyć go do tyłu.



Usiądź z powrotem na kółkach zapobiegających wywróceniu się fotela i przechowuj go.



Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma służyć wyłącznie jako skrócona instrukcja. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi produktu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +44 800 915 0800 lub e-mailowy pod adresem hello@efoldi.com.