

eFOLDi® Stručná příručka Navigator



Před použitím umístěte zařízení eFOLDi Navigator na volném prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí. Rozložení je snadné a s nácvikem jej nastavíte během několika sekund.

Před prvním výletem doporučujeme nácvik.



JAK SE ROZLOŽIT



Navigátor eFOLDi má brašnu na příslušenství. Uvnitř najdete kolečka proti překlopení, nabíječku baterií a volitelná madla.



Před montáží položte vnější krabici naplocho a odstraňte z přístroje Navigator všechny obaly.



Postavte židli nahoru a odepněte sponu bezpečnostního pásu, která zajišťuje židli ve složené poloze.



Rozložte židli zatlačením sedadla dolů.



Vložte kolečka proti překlopení do zadní části rámu židle tak, aby odpružené knoflíky směřovaly dovnitř.



Ramena instalujte tak, že je zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí a červené tlačítko se nezablokuje.



Vložte tyč joysticku pod opěrku a velmi pevně utáhněte knoflík.



Nainstalujte madla pro obsluhu přišroubováním do horní části rámu židle.



Připevněte ovládání obsluhy k horní části rámu židle.



Posunutím krytu portu a vložením napájecího kabelu připojte napájecí kabel k baterii.



Zatlačte opěrku nohou dolů.



Umístěte protiskluzový polštářek na sedadlo (bobtnavou stranou dolů) a zajistěte jej pomocí suchých zipů.



Červené brzdové páčky jsou nastaveny do polohy pro jízdu vpřed, která zapíná motor. Pro režim volnoběhu zatáhněte obě páčky do zadní polohy.



Zapněte tlačítko napájení, další informace naleznete v uživatelské příručce.

READY NA ROLL!




Ovladač sluchátka je vybaven tlačítky pro nastavení rychlosti s 5 úrovněmi výkonu a 5 nastaveními rychlosti (1 = nízká, 5 = vysoká).

Chcete-li vypnout zvuk zpětného chodu, stačí stisknout tlačítko (na obrázku výše).



Ovladač pro asistenta upravuje rychlost chůze pro vašeho asistenta a umožňuje kontrolu baterie pomocí páčky pro pohyb vpřed a vzad.

NABÍJENÍ BATERIE

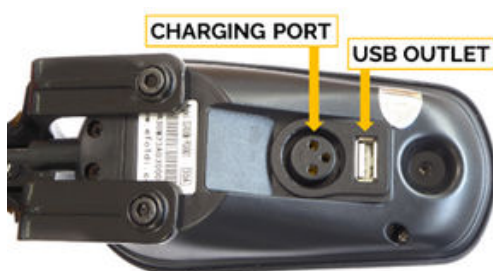

Nabíjecí port se nachází pod sluchátkem a k dispozici je také zásuvka USB pro napájení zařízení.



Chcete-li zařízení eFOLDi Navigator nabít, zapojte nabíječku do základny joysticku a připojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky. Případně můžete baterii vyjmout a nabíjet ji samostatně - v případě potřeby můžete křeslo ponechat v autě.

JAK SLOŽIT KE SKLADOVÁNÍ



Tlačítkem POWER na ručním ovladači vypnete křeslo, pokud jej nepoužíváte, abyste šetřili energii baterie.



Sklopte opěrku nohou nahoru.



Stiskněte sklopnou páčku (umístěnou pod předním okrajem sedadla) a zvedněte sedadlo, aby se sklopilo dozadu.



Při ukládání židli posadte zpět na kolečka proti překlopení.



Vezměte prosím na vědomí, že tento leták slouží pouze jako stručný návod.

Úplné pokyny naleznete v našem návodu k obsluze výrobku.

V případě jakýchkoli dotazů nám zavolejte na číslo +44 800 915 0800 nebo napište na adresu hello@efoldi.com.

eFOLDi 