




Áður en þú notar áttavitann skaltu setja eFOLDi Compass á opnu svæði fjarri gæludýrum og ungum börnum. Það er auðvelt að fella hann út, og þú getur sett hann upp á örfáum sekúndum. Við mælum með að þú æfir þig áður en þú ferð í fyrsta ferðalagið.



HVERNIG Á AÐ FELLA ÚT

SKREF 1 – SETTU SAMAN STÝRISGJÖFINA

Fjarlægðu allan umbúnað áður en þú byrjar.

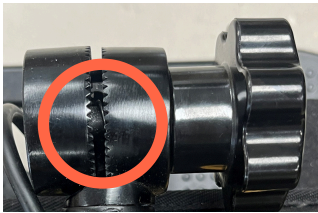

Gakktu úr skugga um að tannhjólið sé losað (rangsælis) og að bili sé á milli tanna á hjörinni.



Losaðu stýrisgjöfina úr plasthaldaranum og lyftu henni í uppréttan stöðu.



Tryggðu stýrisgjöfina með því að snúa tannhjólinu (réttisælis). Þú getur stillt stýrisgjöfina þannig að hún henti þinni nánd og þægindum.


SKREF 2 – LYFTU SÆTINU



Lyftu baki sætisins upp í uppréttan stöðu. Það mun "smella" á sinn stað.



UPPSETNING (VALKVÆÐ) ARMHVÍLAR

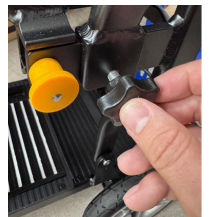

Settu armhvílarinnar í raufarnar, stilltu þær af og herðið með stóru, auðveldum snúningshnúðunum.

LOKASAMÞYKKT ÖRYGGISPRÓFUNAR



Gakktu úr skugga um að stýrisgjöfin sé örugglega fest, ef ekki – herðu tannhjólið.



Athugaðu að rauði segulbremsuleggurinn sé í LÆSTU (aftur) stöðu til að virkja mótorinn.

AÐ BYRJA



Til að kveikja á rafskútunni, ýttu á gráa hnappinn undir rafhlöðuskjánum. Veldu (D) fyrir akstur eða (R) fyrir afturábak, og ýttu svo á þumalhraðastýringuna til að fara af stað. Gakktu úr skugga um að hlaða rafhlöðuna þegar skjárinn sýnir appelsínugult ljós.

HVERNIG Á AÐ NOTA



Til að hlaða, tengdu rafmagnssnúru við hleðslutengið sem er efst á stýrisgjöfinni.



Til að fjarlægja rafhlöðuna skaltu lyfta læsingunni og draga hana varlega upp.

Hleðslutengið er staðsett á hlið rafhlöðunnar.

HVERNIG Á AÐ FELLA FYRIR Geymslu

SKREF 1 – FELLDU BAKKLÆÐIÐ NIÐUR



Áttavitinn fellur alltaf saman á sama hátt, hvort sem hann er með eða án armrests.

Dragðu í gula sleðann til að losa sætið.

Felltu bakklaðið niður flatt að sætisgrunnum, og vertu viss um að það fari undir og sitji fyrir neðan tannhjólið á stýrisgjöfinni.

SKREF 2 – FELLDU NÍÐUR STÝRISGJÖFINNA



Losaðu stýrisgjöfina með því að snúa tannhjólinu rangsælis.

Leggðu stýrisgjöfina flata að bakinu á sætinu og festu hana í plasthaldarann.

Vinsamlegast athugið að þessi leiðarvísir er aðeins til einfaldra leiðbeininga. Fyrir fullar leiðbeiningar, vinsamlegast skoðið notendahandbókina okkar. Ef þið hafið einhverjar spurningar, hafið samband við okkur í síma 0800 915 0800 eða með tölvupósti á services@efoldi.com.