

Lichtgewicht mobiliteitsoplossingen

Waar het leven je ook brengt

www.efoldi.com



Scan voor meer
informatie

Waar het leven je ook brengt, wij staan voor je klaar om ervoor te zorgen dat je de mobiliteit en vrijheid hebt om van elk moment te genieten.

Als erkend marktleider in het ontwerpen en produceren van draagbare scooters en elektrische rolstoelen streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te herontdekken.

De bekroonde mobiliteitsoplossingen van eFOLDi zijn niet alleen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, ze maken reizen ook eenvoudig en haalbaar – of dat nu door de lucht, over land of over zee is.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Waarom eFOLDi zich onderscheidt



Lichtgewicht

Gemakkelijk dragen en op te tillen




Garantie

Ondersteund door volledige service en garantie



Compact

Opvouwbaar tot de afmetingen van handbagage

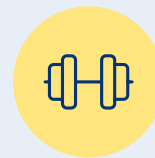

Robuust

Gemoedsrust dankzij sterke, duurzame materialen



Innovatie

Onze producten worden vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit, zodat ze robuust genoeg zijn om de zwaarste omstandigheden en het ruigste terrein te weerstaan. Onze frames zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of magnesiumlegeringen, onze hoogwaardige borstelloze motoren leveren uitzonderlijke prestaties en onze batterijen maken gebruik van geavanceerde lithium-iontechnologie, waardoor ze niet alleen duurzaam zijn, maar ook een uitstekende betrouwbaarheid bieden.



2 jaar
garantie op de
accu + 2 jaar
garantie op de
scooter**

Of het nu gaat om winkels, het park of een kort uitstapje – de Compass staat altijd voor u klaar.

Onze eerste vierwieler, in twee stappen opvouwbaar scooter, ontworpen om uw reizen gemakkelijker en aangener te maken.

Met een gewicht van slechts 11kg (zonder batterij) is hij licht en perfect om vol vertrouwen over verschillende terreinen te rijden.

Bovendien is het in een paar seconden op te vouwen, waardoor het makkelijk mee te nemen en op te bergen is, waar je ook heen gaat.



Lichtgewicht
met een gewicht
van slechts 11kg*



Topsnelheid
6km/h



Bereik
tot 16km



Garantie
Ondersteund
door volledige
service en
garantie



Ideaal voor: Mensen met lichte mobiliteitsproblemen die extra ondersteuning en stabiliteit nodig hebben en op zoek zijn naar een scooter die meer vertrouwen, veiligheid en gebruiksgemak biedt om zich te verplaatsen.



*zonder batterij/accessoires

**voorwaarden zijn van toepassing

De lichtere manier om je leven kracht bij te zetten

De perfecte combinatie van compromisloze stijl, draagbaarheid en veelzijdigheid

Opklapbare armleuningen (optioneel)

voor eenvoudig in- en uitstappen van de scooter

Ergonomische, ademende stoel

met drukverlagend traagschuim

Automatisch remmen

vertraagt/stopt bij het loslaten van het gashendel

Oplaadpoort

voor opladen aan boord of buiten het voertuig

Robuust

kan gebruikers tot 120kg dragen.

Het gemak van een twee vouwbaar mogelijkheid

perfect voor gebruikers met beperkte motoriek of kracht.

Krachtige motor

trillingsarme motor met fluisterstille werking

Secure-Turn®-technologie

De ingebouwde gyroscoop helpt bij stabiliteit en balans door veranderingen in oriëntatie en beweging te detecteren.

Eenvoudige en lichte bediening

Sleutellose bediening met eenvoudige startknop met één druk op de knop

Flexibele rugleuning

ontworpen om verschillende lichaamsvormen te accommoderen

Ruime voetruimte

helpt krampen en ongemak voorkomen

Lithium-ionbatterij van automobielkwaliteit

met een bereik van 16km, verwijderbaar voor opladen aan boord of buiten het voertuig

Vaste banden

zonder pompen en geschikt voor verschillende terreinen

Lichtgewicht en draagbaar

met een gewicht van slechts 11kg*



“Het is zo slim, de scooter past zich automatisch aan als ik draai, waardoor het rijden veilig en soepel aanvoelt.”

Ros, Geverifieerde koper 

De Compass combineert comfort, een compact ontwerp en moeiteloos opvouwen — alles in één slimme scooter.

- Stabiel, comfortabel en klaar voor elke reis
- Uitzonderlijk licht met slechts 11kg*, maar toch opmerkelijk robuust, geschikt voor passagiers tot 120kg
- Wendbaar en zeer manoeuvreerbaar, Secure-Turn®-technologie voor extra vertrouwen en stabiliteit
- Gemakkelijk op te vouwen, past in de meeste kofferbakken en is vliegtuig veilig
- Rijdt tot 6km/h per uur met een bereik van 16km
- De perfecte reisgenoot!

Accessoires

Maak elke reis gemakkelijker met doordachte extra's die zijn ontworpen voor uw comfort en gemak - van slimme opbergmogelijkheden en beschermhoezen tot kussens, hulpstukken, reservebatterijen en opladers.



Compass Specificatie*

Maximale snelheid	6km/h
Maximaal bereik	16km
Maximaal gebruikersgewicht	120kg
Klimvermogen	1:10 Helling
Draaicirkel	135cm
Afmetingen opgevouwen	92 x 43 x 40cm
Ontvouwde dimensies	92 x 43 x 96cm
Gewicht (excl. batterij)	11kg
Gewicht (incl. batterij)	13kg
Type gebruik	Bestrating en binnen
Remsysteem	Elektromagnetisch
Luchtvaartmaatschappijvriendelijk	Ja

*Specificaties kunnen variëren als gevolg van fabricagetoleranties.



2 jaar garantie op de accu + 2 jaar garantie op de scooter**

**Algemene voorwaarden zijn van toepassing.



Scan voor meer
informatie

eFOLDi

Voor meer informatie...

Bel ons
vandaag nog op
+44 (0) 1737 420201

Of stuur ons
een e-mail op:
sales@efoldi.com

Uw lokale eFOLDi-dealer:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.