



2 jaar
garantie op
de accu + 2
jaar garantie
op de
scootery™

Comfort en draagbaarheid, perfect op elkaar afgestemd.

De eFOLDi Cliq bestaat uit vier onderdelen die elk minder dan 10 kg wegen en is voorzien van EZ-Cliq-verbindingen voor een snelle, onafhankelijke montage.


Geniet van langere ritten met een soepele, stabiele rijervaring.

Voor wie waarde hecht aan stabiliteit, een comfortabele zitting en een stevige wielbasis, met de flexibiliteit om de step uit elkaar te halen voor eenvoudig transport.



Lichtgewicht

totaalgewicht van 31 kg, bestaande uit 4 onderdelen die eenvoudig met de hand kunnen worden opgetild

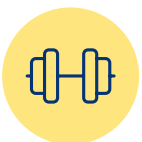

Stevige constructie

Geschikt voor gebruikers tot 120 kg



Bereik

tot 15km



Garantie

Met volledige ondersteuning en garantie*

*er gelden algemene voorwaarden

 Ideaal voor: mensen met matige mobiliteitsbeperkingen die extra ondersteuning en stabiliteit nodig hebben en op zoek zijn naar een draagbare scooter die meer zelfvertrouwen, veiligheid en gebruiksgemak biedt bij het zich verplaatsen.



Je betrouwbare metgezel op elke reis

Ontworpen voor comfort, stabiliteit en zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Extra comfort als standaarduitrusting

Opklapbare armsteunen en praktische opbergoplossingen voor dagelijks gebruiksgemak

Snelheidsinstellingen

met de modus 'schildpad/haas' kun je kiezen tussen langzamer en nauwkeuriger of sneller rijden

WigWag-bediening

Intuïtief systeem met twee hendels voor eenvoudige en betrouwbare bediening

Comfortabele stoel

Draaibaar voor gemakkelijk in- en uitstappen, in hoogte verstelbaar voor uw ideale zitpositie

Delta-vormig stuur

Ergonomisch ontwerp voor een stevige grip en comfortabel sturen

Robuust

Geschikt voor gebruikers tot 120 kg

Voor- en achterlichten

Voor extra zichtbaarheid

Vering

De voor- en achtervering dempt oneffenheden en hobbelig terrein, wat zorgt voor een soepelere en comfortabelere rit

Lithium-ionbatterij van automobielkwaliteit

met een actieradius van 9 mijl / 14 km. Verwijderbaar voor opladen in of buiten het voertuig

Ruime voetruimte

Helpt krampen en ongemak te voorkomen.

Automatisch remmen

Vertraagt bij het loslaten van het gaspedaal, ideaal voor gebruikers met een trage reactietijd

Massieve banden

hoeven niet te worden opgepompt en geschikt voor diverse terreinen

Hantering

De afzonderlijke onderdelen wegen minder dan 10 kg en zijn voorzien van Easy-Cliq-verbindingen voor moeiteloze montage en transport



Personalisatie

Standaard voorzien van verwisselbare gekleurde accenten om je fiets een persoonlijk tintje te geven



“Met de eFOLDi kan ik weer naar plekken gaan waar ik al een tijdje niet meer ben geweest. Ik raad mensen dan ook van harte aan: koop een eFOLDi.”

Peter, geverifieerde koper 

Klikt in elkaar

- Modulair ontwerp: eenvoudig in elkaar te zetten en te vervoeren
- Lichtgewicht onderdelen: <10 kg met Easy-Cliq-verbindingen
- Eenvoudig in elkaar te klikken: probleemloze installatie
- Past overal: zonder gedoe op te bergen in de auto en thuis

Clicks With You

- Zitcomfort staat voorop: verstelbare, ondersteunende zitting met allround vering
- Betrouwbare bediening: WigWag-hendels, ergonomisch delta-stuur, eenvoudige snelheidskeuze
- Stabiel rijgedrag: stevig chassis met vier wielen voor soepel dagelijks gebruik
- Op maat gemaakt: personaliseer met accessoires en kleuraccenten

Personalisatie

Met alle verwisselbare accentopties standaard inbegrepen; je kunt ze naar eigen smaak en het seizoen combineren



eFoldi Yellow



Moonlight Silver



Harbour Blue



Waar het leven je ook brengt, wij staan voor je klaar om ervoor te zorgen dat je de mobiliteit en vrijheid hebt om van elk moment te genieten

Als erkend marktleider op het gebied van het ontwerp en de productie van draagbare scooters en elektrische rolstoelen streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te herontdekken.

De bekroonde mobiliteitsoplossingen van CLIQ eFOLDi zijn niet alleen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, maar maken reizen ook eenvoudig en haalbaar – of dat nu door de lucht, over land of over zee is.

Innovatie

Onze producten worden vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit, zodat ze robuust genoeg zijn om zelfs de zwaarste omstandigheden en het ruigste terrein te doorstaan. Onze frames zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of magnesiumlegeringen, onze hoogwaardige borstelloze motoren leveren uitzonderlijke prestaties en onze accu's maken gebruik van geavanceerde lithium-iontechnologie, waardoor ze niet alleen duurzaam zijn, maar ook een uitstekende betrouwbaarheid bieden.

COMPASS



CLIQ



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Technische gegevens van de Cliq*

Maximumsnelheid	6kph
Maximaal bereik	15km
Maximaal gebruikersgewicht	120kg
Klimvaardigheid	1:10 Gradient
Draaicirkel	121cm
Afmetingen in uitgevouwen toestand	100 x 61 x 88cm
Gewicht per onderdeel	3.6kg 9.3kg 9.8kg 7.3kg
Totaalgewicht (excl. accu)	28kg
Totaalgewicht (incl. accu)	31kg
Soort gebruik	Trottoir, binnen
Remsysteem	Elektromagnetisch
Geschikt voor vliegreizen	Ja

*Specificaties kunnen afwijken als gevolg van fabricagetoleranties

2 jaar garantie op de accu + 2 jaar garantie op de scooter***

***er gelden algemene voorwaarden



Scan voor meer informatie



Voor meer informatie...

Bel ons vandaag nog op +44 (0) 800 999 8123

Of stuur ons een e-mail naar: sales@efoldi.com



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, Unit H The Courtyard Business Centre, Lonesome Lane, Reigate, Surrey, RH2 7QT



eFOLDi Cliq

Lichtgewicht mobiliteitsoplossingen

Voor waar het leven je ook brengt

www.efoldi.com

Waarom eFOLDi zich onderscheidt




Licht van gewicht gemakkelijk te dragen en op te tillen



Garantie ondersteund door volledige ondersteuning en garantie



Compact en draagbaar voor meer zelfstandigheid

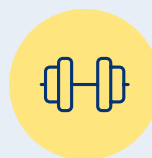

Robuust Grote gemoedsrust dankzij sterke, duurzame materialen



Scan voor meer informatie

