



Garantie 2 ans sur la batterie + 2 ans sur le scooter**

Confort et praticité, réunis en un clic.

L'eFOLDi Cliq se compose de quatre parties pesant chacune moins de 10 kg, conçues avec des raccords EZ-Cliq pour un assemblage rapide et autonome.


Profitez de trajets plus longs avec une conduite fluide et confortable.

Pour ceux qui recherchent stabilité, siège confortable et empattement solide, avec la possibilité de démonter le scooter pour un transport facilité.



Léger

poids total de 31 kg avec 4 parties faciles à soulever

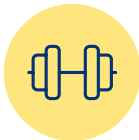

Structure robuste

Supporte des utilisateurs jusqu'à 120 kg



Autonomie

jusqu'à 15 km



Garantie

Bénéficiez d'un support complet et d'une garantie*

*termes et conditions applicables


Idéal pour : les personnes ayant des problèmes de mobilité modérés qui ont besoin d'un soutien et d'une stabilité supplémentaires, à la recherche d'un scooter portable offrant plus de confiance, de sécurité et de facilité d'utilisation pour se déplacer.



Votre compagnon de confiance à chaque trajet

Conçu pour le confort, la stabilité et l'indépendance au quotidien.

Confort supplémentaire de série

Accoudoirs rabattables et solutions de rangement pratiques pour un usage quotidien

Réglages de vitesse

Le mode tortue/lièvre vous permet de choisir entre précision lente ou déplacement rapide

Commandes WigWag

Système intuitif à double levier pour une utilisation simple et assurée

Siège orienté confort

Pivotant pour faciliter les transferts, réglable en hauteur pour votre position idéale

Robuste

Supporte des utilisateurs jusqu'à 120 kg

Suspension

Les suspensions avant et arrière absorbent les chocs et les terrains irréguliers pour une conduite plus fluide et confortable

Espace pour les pieds spacieux

Aide à prévenir les crampes et l'inconfort

Batterie lithium-ion de qualité automobile

Avec une autonomie de 14 km. Amovible pour une recharge à bord ou hors du véhicule

Maniabilité

Les pièces individuelles pèsent moins de 10 kg avec des raccords easy-Cliq pour un assemblage et un transport sans effort



Guidon en forme de delta

Design ergonomique pour une prise en main sûre et une conduite confortable

Feux avant et arrière

Pour une meilleure visibilité

Freinage automatique

Ralentit à la relâche de l'accélérateur, idéal pour les utilisateurs ayant des temps de réaction lents

Pneus pleins

Sans besoin de gonflage et adaptés à tous types de terrains

Personnalisation

Accents colorés interchangeables de série pour personnaliser votre scooter



"Grâce à l'eFOLDi, je peux visiter des endroits où je n'avais plus pu aller depuis un moment. Je suis très heureux de le dire aux gens – achetez un eFOLDi"

Peter, acheteur vérifié 

Clicks Together

- Design modulaire: montage et transport faciles
- Pièces légères : <10 kg avec raccords Easy-Cliq
- Simplicité d'assemblage par clipsage: installation sans tracas
- S'adapte partout : rangement en voiture et à la maison sans stress

Clicks With You

- Assise priorité confort : siège réglable et enveloppant avec suspension intégrale
- Commandes assurées : leviers WigWag, guidon ergonomique en delta, sélection simple de la vitesse
- Maniabilité stable : châssis quatre roues sécurisé pour des déplacements quotidiens fluides
- Conçu pour vous : personnalisable avec des accessoires et des accents colorés

Personnalisation

avec toutes les options d'accents interchangeables incluses de série, vous pouvez les combiner selon votre style et la saison



eFoldi Yellow



Moonlight Silver



Harbour Blue



Où que la vie vous mène, nous serons là pour vous assurer la mobilité et la liberté de profiter de chaque instant

En tant que leader reconnu dans la conception et la fabrication de scooters portables et de fauteuils roulants électriques, eFOLDi s’efforce d’aider les personnes à retrouver leur liberté et leur indépendance.

Les solutions de mobilité primées CLIQ d’eFOLDi sont non seulement faciles à ranger et à transporter, mais contribuent également à rendre les déplacements simples et accessibles – que ce soit par air, par terre ou par mer.

Innovation

Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité pour garantir leur robustesse face aux conditions et terrains les plus difficiles. Nos cadres sont fabriqués en alliages d'aluminium ou de magnésium de haute qualité, nos moteurs sans balais haute performance offrent des performances exceptionnelles, et nos batteries utilisent une technologie lithium-ion avancée, ce qui les rend non seulement durables, mais aussi d'une fiabilité remarquable.

COMPASS



CLIQ



EXPLORER



LITE



NAVIGATOR



Spécifications du Cliq*

Vitesse maximale	6kph
Autonomie maximale	15km
Poids maximal de l'utilisateur	120kg
Capacité de montée	1:10 Gradient
Rayon de braquage	121cm
Dimensions dépliées	100 x 61 x 88cm
Poids de chaque pièce	3.6kg 9.3kg 9.8kg 7.3kg
Poids total (batterie exclue)	28kg
Poids total (batterie incluse)	31kg
Type d'utilisation	Trottoir, Intérieur
Système de freinage	Électromagnétique
Compatible avec les compagnies aériennes	Yes

*Les spécifications peuvent varier en raison des tolérances de fabrication



Garantie 2 ans sur la batterie + 2 ans sur le scooter***

***termes et conditions applicables



Scannez le code pour plus d'informations



Pour plus d'informations...

Appelez-nous dès aujourd'hui au 0800 999 8123

ou envoyez-nous un e-mail à: sales@efoldi.com



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, Unit H The Courtyard Business Centre, Lonesome Lane, Reigate, Surrey, RH2 7QT



eFOLDi Cliq

Solutions de mobilité légères

Pour où que la vie vous emmène

www.efoldi.com

Pourquoi eFOLDi se démarque



Léger

À porter et soulever facilement



Garantie

Bénéficiez d'un support complet et d'une garantie



Compact

Portable pour une plus grande indépendance



Robuste

Tranquillité d'esprit grâce à des matériaux solides et durables



Scannez le code pour plus d'informations

